

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006229

International filing date: 24 March 2005 (24.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-087578  
Filing date: 24 March 2004 (24.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 July 2005 (14.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2 0 0 4 年 3 月 2 4 日

出 願 番 号

Application Number:

特 願 2 0 0 4 - 0 8 7 5 7 8

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号

The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 0 8 7 5 7 8

出 願 人


Applicant(s):

中外製薬株式会社

2 0 0 5 年 6 月 2 9 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川

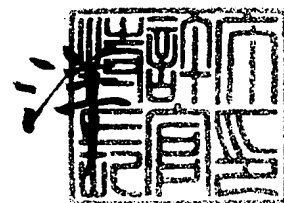

【書類名】	特許願
【整理番号】	1043081
【提出日】	平成16年 3月24日
【あて先】	特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】	C07C 16/18
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都北区浮間5丁目5番1号 中外製薬株式会社内
【氏名】	加野 勝安
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都北区浮間5丁目5番1号 中外製薬株式会社内
【氏名】	寺島 勇
【特許出願人】	
【識別番号】	000003311
【氏名又は名称】	中外製薬株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100099759
【弁理士】	
【氏名又は名称】	青木 篤
【電話番号】	03-5470-1900
【選任した代理人】	
【識別番号】	100077517
【弁理士】	
【氏名又は名称】	石田 敬
【選任した代理人】	
【識別番号】	100087871
【弁理士】	
【氏名又は名称】	福本 積
【選任した代理人】	
【識別番号】	100087413
【弁理士】	
【氏名又は名称】	占賀 哲次
【選任した代理人】	
【識別番号】	100082898
【弁理士】	
【氏名又は名称】	西山 雅也
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	209382
【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	9814920

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

インターロイキン-6 受容体 (IL-6R) に対するヒト型化PM-1抗体のサブタイプであって、片方の重鎖C末端がPro-NH<sub>2</sub> (447) である抗体サブタイプ (1)。

【請求項 2】

インターロイキン-6 受容体 (IL-6R) に対するヒト型化PM-1抗体のサブタイプであって、両方の重鎖C末端がPro-NH<sub>2</sub> (447) である抗体サブタイプ (2)。

【請求項 3】

請求項1又は2に記載のサブタイプに対応するヒト型化PM-1抗体の生来型の重鎖が、配列番号：1に記載のアミノ酸配列を有する、請求項1又は2に記載の抗体サブタイプ。

【請求項 4】

前記ヒト型化PM-1抗体サブタイプの軽鎖が、配列番号：2に記載のアミノ酸配列を有する、請求項1～3のいずれか1項に記載の抗体サブタイプ。

【請求項 5】

請求項1～4のいずれか1項に記載の、サブタイプ(1)もしくはサブタイプ(2)、又はサブタイプ(1)及び(2)の両者を含んで成る医薬組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】インターロイキン-6受容体に対するヒト型化抗体のサブタイプ

【技術分野】

【0001】

本発明は、インターロイキン-6受容体（IL-6R）に対する抗体の一種であるヒト型化PM-1抗体の新規なサブタイプに関する。

【背景技術】

【0002】

遺伝子組換えにより生産されたタンパク質は、理論上は、遺伝子配列から推定されるアミノ酸配列を有するはずであるが、実際上は、種々の変異体が生産される場合がある。これは、既知の又は新規な生体内（転写後）修飾（modification）や自然発生の（非酵素的な）タンパク分解によるものである（R. J. Harris, J. Chromatogr. A 705 (1995) 129-134）。医薬品の成分として使用されるタンパク質は、生体による生合成過程を利用する遺伝子組換え法により生産されるため、分子構造が異なるサブタイプが生産される可能性がある。サブタイプの種類や含有量は医薬品の品質を規定するものであるものであるので、サブタイプのプロファイルを特性解析し、医薬品組成物としての有用性を担保することが重要である。

【0003】

IL-6はB細胞刺激因子2（BSF2）あるいはインターフェロン $\beta$ 2とも呼称されたサイトカインである。IL-6は、Bリンパ球系細胞の活性化に關与する分化因子として発見され（Hirano, T. et al., Nature (1986) 324, 73-76）、その後、種々の細胞の機能に影響を及ぼす多機能サイトカインであることが明らかになった（Akira, S. et al., Adv. in Immunology (1993) 54, 1-78）。IL-6は、Tリンパ球系細胞の成熟化を誘導することが報告されている（Lotz, M. et al., J. Exp. Med. (1988) 167, 1253-1258）。

【0004】

IL-6は、細胞上で二種の蛋白質を介してその生物学的活性を伝達する。一つは、IL-6が結合する分子量約30kDのリガンド結合性蛋白質のIL-6受容体（IL-6R）である（Taga, T. et al., J. Exp. Med. (1987) 166, 967-981, Yamasaki, K. et al., Science (1987) 241, 825-828）。IL-6Rは、細胞膜を貫通して細胞膜上に発現する膜結合型の他に、主にその細胞外領域からなる可溶性IL-6Rとしても存在する。

【0005】

抗IL-6R抗体に関しては、いくつかの報告がある（Novick, D. et al., Hybridoma (1991) 10, 137-146、Huang, Y. W. et al., Hybridoma (1993) 12, 621-630、国際特許出願公開番号WO 95-09873、フランス特許出願公開番号FR 2694767、米国特許番号US 521628）。その一つであるマウス抗体PM-1（Hirata, Y. et al., J. Immunol. (1989) 143, 2900-2906）の相捕性決定領域（CDR; complementarity determining region）をヒト抗体へ移植することにより得られたヒト型化PM-1抗体が知られている（国際特許出願公開番号WO 92-19759）。

しかしながら、ヒト型化PM-1抗体のサブタイプについては知られていない。

【0006】

【特許文献1】WO 92/19759

【特許文献2】特開平8-99902合公報

【特許文献3】フランス特許出願公開番号FR 2694767

【特許文献4】米国特許番号US 521628

【0007】

【非特許文献1】R. J. Harris, J. Chromatogr. A 705 (1995) 129-134

【非特許文献2】Hirano, T. et al., Nature (1986) 324, 73-76

【非特許文献3】Akira, S. et al., Adv. in Immunology (1993) 54, 1-78

【非特許文献4】Lotz, M. et al., J. Exp. Med. (1988) 167, 1253-1258

【非特許文献5】Taga, T. et al., J. Exp. Med. (1987) 166, 967-981

【0008】

【非特許文献6】Yamasaki, K. et al., Science (1987) 241, 825-828

【非特許文献7】Novick, D. et al., Hybridoma (1991) 10, 137-146

【非特許文献8】Huang, Y. W. et al., Hybridoma (1993) 12, 621-630

【非特許文献9】Hirata, Y. et al., J. Immunol. (1989) 143, 2900-2906

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

従って、本発明はヒト型化PM-1抗体の新規なサブタイプ、及び当該サブタイプを含んで成る医薬組成物を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明者は、組換え生産されたヒト型化PM-1抗体を精密に分離した結果、ヒト型化PM-1抗体の重鎖を構成する定常領域のC-末端(448位)のGlyが欠落して447位のProがアミド化された分子種が存在し、且つ、抗体を構成する2本の重鎖の内、一方のみがアミド化されている抗体サブタイプ(サブタイプ1と称する)と両方がアミド化されている抗体サブタイプ(サブタイプ2と称する)が存在することを見出した。更に、本発明者は、上記いずれのサブタイプも、C-末端がGly(448)である生来型抗体と同等の抗原結合性及び細胞増殖阻害活性を有することを見出し、本発明を完成した。

【0011】

従って、本発明は、インターロイキン-6受容体(IL-6R)に対するヒト型化PM-1抗体のサブタイプであって、片方の重鎖C末端がPro-NH<sub>2</sub>(447)である抗体サブタイプ(1)、及びインターロイキン-6受容体(IL-6R)に対するヒト型化PM-1抗体のサブタイプであって、両方の重鎖C末端がPro-NH<sub>2</sub>(447)である抗体サブタイプ(2)を提供する。上記の両サブタイプに対応するヒト型化PM-1抗体の生来型の重鎖C末端はGly(448)である。好ましい態様において、アミド化された重鎖サブタイプに対応する生来の重鎖は、配列番号：1に記載のアミノ酸配列を有する。また、好ましい態様において、本発明の抗体サブタイプを構成する軽鎖は、配列番号：2に記載のアミノ酸配列を有する。

本発明はまた、上記のサブタイプ(1)もしくはサブタイプ(2)又はサブタイプ(1)及び(2)の両者を含んで成る医薬組成物を提供する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

本発明の抗体サブタイプに対応する生来のヒト型化PM-1抗体は、IL-6Rに対する、PM-1と称するマウスモノクローナル抗体の重鎖(H鎖)及び軽鎖(L鎖)を構成する可変領域(V領域)中の相補性決定領域(CDR)を、ヒト抗体V領域の対応するCDR領域と置き換えたものである。前記マウス抗IL-6R抗体のL鎖V領域のCDRのアミノ酸配列は、国際公開WO 92/19759の表2のL<sub>V</sub>PM-1の行のCDR1、CDR2及びCDR3に記載されており、また、前記マウス抗IL-6R抗体のH鎖V領域のCDRのアミノ酸配列は、国際公開WO 92/19759の表3のH<sub>V</sub>PM-1の行のCDR1、CDR2及びCDR3に記載されている。

【0013】

上記ヒト型化PM-1抗体のL鎖V領域のフレームワーク領域(FR)は、ヒト抗体RE1由来のものが好ましく、そのアミノ酸配列は、国際公開WO 92/19759の表2のRE1の行のFR1、FR2、FR3及びFR4に記載されている。また、上記ヒト型化PM-1抗体のH鎖V領域のフレームワーク領域(FR)は、ヒト抗体NEW由来のものが好ましく、そのアミノ酸配列は、国際公開WO 92/19759の表3のNEWの行のFR1、FR2、FR3及びFR4に記載されている。

【0014】

更に、上記の、ヒト抗体のFRとマウスPM-1抗体のCDRから構成されるV鎖の内、FR領域は、抗原結合性や中和活性の改善のため、種々改変されていても良く、例えば、L鎖V領域については、国際公開WO 92/19759の表2のRV<sub>L</sub>a及びRV<sub>L</sub>bの行のFR1、FR2、FR3及びFR4に記載されている(バージョンa及びバージョンbと称する)、また、H鎖V領域につい

ては、国際公開W0 92/19759の表3のRV<sub>Ha</sub>~RV<sub>Hl</sub>の行のFR1、FR2、FR3及びFR4に記載されている（バージョンa~バージョンfと称する）。

#### 【0015】

ヒト型化PM-1抗体のL鎖は、上に記載したL鎖V領域とヒト抗体L鎖の定常領域（C領域）とから成り、またヒト型化PM-1抗体のH鎖は、上に記載したH鎖V領域とヒト抗体H鎖の定常領域（C領域）とから成る。L鎖を構成するC領域としては、ヒトγ-1C領域が好ましく、またH鎖を構成するC領域としては、ヒトκC領域が好ましい。

こうして構成されるヒト型化PM-1抗体のL鎖及びC鎖としては上記の如く、FR領域の改変により種々のバージョンが存在するが、特に好ましい例として、配列番号：1に示すアミノ酸配列を有するH鎖、及び配列番号：2に示すアミノ酸配列を有するL鎖が挙げられる。

#### 【0016】

なお、モノクローナル抗体PM-1のL鎖V領域をコードするDNAを含んで成るプラスミドpPM-k3を含む大腸菌E. coli DH5 α pPM-k3はNCIMB 40366として、またモノクローナル抗体PM-1のH鎖V領域をコードするDNAを含んで成るプラスミドpPM-h1を含む大腸菌E. coli DH5 α pPM-h1はNCIMB 40362として、1991年2月11日に、National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limitedにブタベスト条約に基づき国際寄託されている。また、モノクローナル抗体PM-1を産生するハイブリドーマPM1は、FERM BP-2998として、1990年7月10日に、独立行政法人産業技術総合研究所微生物寄託センター（茨城県つくば市東1丁目1番地1中央第6）にブタベスト条約に基づき国際寄託されている。

#### 【0017】

上記の如きアミノ酸配列を有するL鎖又はH鎖をコードするDNAは、常法に従って構築することが出来る。具体的には、マウス抗体のCDRとヒト抗体のフレームワーク領域（FR； framework region）を連結するように設計したDNA配列を、末端部にオーバーラップする部分を有するように作製した数個のオリゴヌクレオチドからPCR法により合成する。得られたDNAをヒト抗体C領域をコードするDNAと連結し、次いで発現ベクターに組み込んで、これを宿主に導入し産生させることにより得られる（欧州特許出願公開番号EP 239400、国際特許出願公開番号W0 92-19759 参照）。

#### 【0018】

CDRを介して連結されるヒト抗体のFRは、相補性決定領域が良好な抗原結合部位を形成するものが選択される。必要に応じ、再構成ヒト抗体の相補性決定領域が適切な抗原結合部位を形成するように抗体の可変領域のフレームワーク領域のアミノ酸を置換してもよい（Sato, K. et al., Cancer Res. (1993) 53, 851-856）。

ヒト型化抗体には、ヒト抗体C領域が使用される。ヒト抗体C領域としては、C<sub>γ</sub>が挙げられ、例えば、C<sub>γ</sub>1、C<sub>γ</sub>2、C<sub>γ</sub>3 又は C<sub>γ</sub>4 を使用することができる。

#### 【0019】

前記のように構築した抗体遺伝子は、公知の方法により発現させ、取得することができる。哺乳類細胞の場合、常用される有用なプロモーター、発現される抗体遺伝子、その3'側下流にポリAシグナルを機能的に結合させたDNAあるいはそれを含むベクターにより発現させることができる。例えばプロモーター／エンハンサーとしては、ヒトサイトメガロウイルス前期プロモーター／エンハンサー（human cytomegalovirus immediate early promoter/enhancer）を挙げることができる。

#### 【0020】

また、その他に本発明で使用される抗体発現に使用できるプロモーター／エンハンサーとして、レトロウイルス、ポリオーマウイルス、アデノウイルス、シミアンウイルス40（SV 40）等のウイルスプロモーター／エンハンサーやヒトエロンゲーションファクター-α（HEF1α）などの哺乳類細胞由来のプロモーター／エンハンサーを用いればよい。

例えば、SV 40 プロモーター／エンハンサーを使用する場合、Mulliganらの方法（Mulligan, R. C. et al., Nature (1979) 277, 108-114）、また、HEF1αプロモーター／エンハンサーを使用する場合、Mizushimaらの方法（Mizushima, S. and Nagata, S. Nucleic

Acids Res. (1990) 18, 5322 ) に従えば容易に実施することができる。

#### 【0021】

大腸菌の場合、常用される有用なプロモーター、抗体分泌のためのシグナル配列、発現させる抗体遺伝子を機能的に結合させて発現させることができる。例えばプロモーターとしては、*lacZ*プロモーター、*araB*プロモーターを挙げることができる。*lacZ*プロモーターを使用する場合、Wardらの方法 (Ward, E. S. et al., Nature (1989) 341, 544-546; Ward, E. S. et al. FASEB J. (1992) 6, 2422-2427)、*araB*プロモーターを使用する場合、Betterらの方法 (Better, M. et al. Science (1988) 240, 1041-1043) に従えばよい。

#### 【0022】

抗体分泌のためのシグナル配列としては、大腸菌のペリプラズムに産生させる場合、*pe*1Bシグナル配列 (Lei, S. P. et al J. Bacteriol. (1987) 169, 4379-4383) を使用すればよい。ペリプラズムに産生された抗体を分離した後、抗体の構造を適切にリフォールド (refold) して使用する (例えば、W096/30394を参照)。

#### 【0023】

複製起源としては、SV 40、ポリオーマウイルス、アデノウイルス、ウシバビローマウイルス (BPV) 等の由来のものを用いることができ、さらに、宿主細胞系で遺伝子コピー数増幅のため、発現ベクターは選択マーカーとして、アミノグリコシドホスホトランスフェラーゼ (APH) 遺伝子、チミジンキナーゼ (TK) 遺伝子、大腸菌キサンチンゲアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ (Ecogpt) 遺伝子、ジヒドロ葉酸還元酵素 (dhfr) 遺伝子等を含むことができる。

本発明で使用する抗体の製造のために、任意の産生系を使用することができる。抗体製造のための産生系は、*in vitro*および*in vivo*の産生系がある。*in vitro*の産生系としては、真核細胞を使用する産生系や原核細胞を使用する産生系が挙げられる。

#### 【0024】

真核細胞を使用する場合、動物細胞、植物細胞、又は真菌細胞を用いる産生系がある。動物細胞としては、(1) 哺乳類細胞、例えば、CHO、COS、ミエローマ、BHK (baby hamster kidney)、HeLa、Veroなど、(2) 両生類細胞、例えば、アフリカツメガエル卵母細胞、あるいは(3) 昆虫細胞、例えば、sf9、sf21、Tn5などが知られている。植物細胞としては、ニコチアナ・タバクム (*Nicotiana tabacum*) 由来の細胞が知られており、これをカルス培養すればよい。真菌細胞としては、酵母、例えば、サッカロミセス (*Saccharomyces*) 属、例えばサッカロミセス・セレビシエ (*Saccharomyces cerevisiae*)、糸状菌、例えばアスペルギルス属 (*Aspergillus*) 属、例えばアスペルギルス・ニガー (*Aspergillus niger*) などが知られている。

#### 【0025】

原核細胞を使用する場合、細菌細胞を用いる産生系がある。細菌細胞としては、大腸菌 (*E. coli*)、枯草菌が知られている。

これらの細胞に、目的とする抗体遺伝子を形質転換により導入し、形質転換された細胞を*in vitro*で培養することにより抗体が得られる。培養は、公知の方法に従い行う。例えば、培養液として、DMEM、MEM、RPMI1640、IMDMを使用することができ、牛胎児血清 (FCS) 等の血清補液を併用することもできる。また、抗体遺伝子を導入した細胞を動物の腹腔等へ移すことにより、*in vivo*にて抗体を産生してもよい。

#### 【0026】

一方、*in vivo*の産生系としては、動物を使用する産生系や植物を使用する産生系が挙げられる。動物を使用する場合、哺乳類動物、昆虫を用いる産生系などがある。

哺乳類動物としては、ヤギ、ブタ、ヒツジ、マウス、ウシなどを用いることができる (Vicki Glaser, SPECTRUM Biotechnology Applications, 1993)。また、昆虫としては、カイコを用いることができる。植物を使用する場合、例えばタバコを用いることができる。

#### 【0027】

これらの動物又は植物に抗体遺伝子を導入し、動物又は植物の体内で抗体を産生させ、



回収する。例えば、抗体遺伝子をヤギ $\beta$ カゼインのような乳汁中に固有に産生される蛋白質をコードする遺伝子の途中に挿入して融合遺伝子として調製する。抗体遺伝子が挿入された融合遺伝子を含むDNA断片をヤギの胚へ注入し、この胚を雌のヤギへ導入する。胚を受容したヤギから生まれるトランスジェニックヤギ又はその子孫が産生する乳汁から所望の抗体を得る。トランスジェニックヤギから産生される所望の抗体を含む乳汁量を増加させるために、適宜ホルモンをトランスジェニックヤギに使用してもよい。(Ebert, K.M. et al., Bio/Technology (1994) 12, 699-702)。

#### 【0028】

また、カイコを用いる場合、目的の抗体遺伝子を挿入したバキュロウィルスをカイコに感染させ、このカイコの体液より所望の抗体を得る(Maeda, S. et al., Nature (1985) 315, 592-594)。さらに、タバコを用いる場合、目的の抗体遺伝子を植物発現用ベクター、例えばpMON 530に挿入し、このベクターをAgrobacterium tumefaciensのようなバクテリアに導入する。このバクテリアをタバコ、例えばNicotiana tabacumに感染させ、本タバコの葉より所望の抗体を得る(Julian, K.-C. Ma et al., Eur. J. Immunol. (1994) 24, 131-138)。

#### 【0029】

上述のようにin vitro又はin vivoの産生系にて抗体を産生する場合、抗体重鎖(H鎖)又は軽鎖(L鎖)をコードするDNAを別々に発現ベクターに組み込んで宿主を同時形質転換させてもよいし、あるいはH鎖およびL鎖をコードするDNAを単一の発現ベクターに組み込んで、宿主を形質転換させてもよい(国際特許出願公開番号W0 94-11523 参照)。

#### 【0030】

本発明のヒト型化PM-1抗体のサブタイプ1及び2を製造するには、宿主として動物の培養細胞、特に好ましくはCHO細胞を使用し、それを動物細胞培養用培地で培養するのが好ましい。また、タンパク質の加水分解物であるペプトンを含む培地が好ましく、牛肉、豚肉、大豆、米、魚肉などに由来するペプトンが使用される。一般に動物由来ペプトンで発現効果が高く、また魚肉(例えば、カツオ)に由来するペプトンを用いると発現量に効果がある。この場合、哺乳動物性ペプトンを含む培地を用いてヒト型化PM-1抗体を製造する場合、サブタイプ1及び2の生成が殆ど見られず、魚肉由来ペプトンや植物性ペプトンなどを含む培地を用いてヒト型化PM-1抗体を製造する場合、サブタイプ1及び2の比率が高くなる。従って、本発明のヒト型化PM-1抗体のサブタイプ1又は2を製造するには、宿主として動物の培養細胞、特に好ましくはCHO細胞を使用し、それを魚肉由来ペプトンや植物由来ペプトンを含む培地で培養するのが特に好ましい。

#### 【0031】

前記のように産生、発現された抗体は、細胞内外、宿主から分離し均一にまで精製することができる。本発明で使用される抗体の分離、精製はアフィニティークロマトグラフィーにより行うことができる。アフィニティークロマトグラフィーに用いるカラムとしては、例えば、プロテインAカラム、プロテインGカラムが挙げられる。プロテインAカラムに用いる担体として、例えば、Hyper D、POROS、Sephacrose F.F.等が挙げられる。その他、通常のタンパク質で使用されている分離、精製方法を使用すればよく、何ら限定されるものではない。

#### 【0032】

また、上記アフィニティークロマトグラフィー以外のクロマトグラフィー、例えば、一般のカラムクロマトグラフィー、例えばイオン交換クロマトグラフィー、疎水クロマトグラフィー、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィーなどの組み合わせによって行うことができる。

更に、フィルター、限外濾過、塩析、透析等を適宜選択、組み合わせれば、本発明で使用される抗体を分離、精製することができる。これらのクロマトグラフィーはFPLC(Fast protein liquid chromatography)或はHPLC(High performance liquid chromatography)に適用し得る。また、逆相HPLC(reverse phase HPLC)を用いてもよい。

#### 【0033】

上記で得られた抗体の濃度測定は吸光度の測定又はELISA等により行うことができる。すなわち、吸光度の測定による場合には、PBS(-)で適当に希釈した後、280 nmの吸光度を測定し、1 mg/mlを約1.35 ODとして算出する。また、ELISAによる場合は以下のように測定することができる。すなわち、0.1M重炭酸緩衝液(pH9.6)で1 µg/mlに希釈したヤギ抗ヒトIgG (TAC製) 100 µlを96穴プレート(Nunc製)に加え、4℃で一晩インキュベーションし、抗体を固相化する。ブロッキングの後、適宜希釈した本発明で使用される抗体又は抗体を含むサンプル、あるいは標品としてヒトIgG (CAPPEL製)100 µlを添加し、室温にて1時間インキュベーションする。

#### 【0034】

洗浄後、5000倍希釈したアルカリフォスファターゼ標識抗ヒトIgG (BIO SOURCE製) 100 µlを加え、室温にて1時間インキュベートする。洗浄後、基質溶液を加えインキュベーションの後、MICROPLATE READER Model 3550 (Bio-Rad 製)を用いて405nmでの吸光度を測定し、目的の抗体の濃度を算出する。

#### 【0035】

本願発明のヒト型化PM-1抗体のサブタイプは、生来のヒト型化PM-1抗体と実質的に同じ抗原結合性を有するため、生来のヒト型化PM-1抗体と同様にIL-6に関連する各種の疾患の治療または予防のために用いることができる。IL-6関連疾患の例としては、急性、慢性炎症性疾患、自己免疫疾患、例えば、腎炎、メサングيوم増殖性腎炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、膵炎、小児慢性関節炎、または全身型若年性特発性関節炎、血管炎、川崎病、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、乾癬、シェーグレン症候群、成人スチル病；腫瘍性疾患、例えば、多発性骨髄腫、キャッスルマン病、悪性リンパ腫、腎癌；感染症、例えば、HIV感染症、EBV感染症；悪液質；その他、プラズマサイトーシス、高イムノグロブリン症、貧血などがあげられ、好ましくは、慢性関節リウマチ、プラズマサイトーシス、高イムノグロブリン症、貧血、腎炎、悪液質、多発性骨髄腫、キャッスルマン病、メサングيوم増殖性腎炎、全身性エリテマトーデス、クローン病、膵炎、乾癬、小児慢性関節炎、または全身型若年性突発性関節炎である。

#### 【0036】

本発明の医薬組成物は、経口的にまたは非経口的に全身あるいは局所的に投与することができる。例えば、点滴などの静脈内注射、筋肉内注射、胸腔内注射、腹腔内注射、皮下注射、坐薬、注腸、経口性腸溶剤などを選択することができる。患者の年齢、症状により適宜投与方法を選択することができる。有効投与量は、一回につき体重1 kgあたり0.01 mgから100 mgの範囲で選ばれる。あるいは、患者あたり1~1000 mg、好ましくは5~50mgの投与量を選ぶことができる。

#### 【0037】

好ましい投与量、投与方法は、たとえば抗IL-6レセプター抗体の場合には、血中にフリーの抗体が存在する程度の量が有効投与量であり、具体的な例としては、体重1 kgあたり1ヶ月(4週間)に0.5 mgから40mg、好ましくは1 mgから20mgを1回から数回に分けて、例えば2回/週、1回/週、1回/2週、1回/4週などの投与スケジュールで点滴などの静脈内注射、皮下注射などの方法で、投与する方法などである。投与スケジュールは、病状の観察および血液検査値の動向を観察しながら2回/週あるいは1回/週から1回/2週、1回/3週、1回/4週のように投与間隔を延ばしていくなど調整することも可能である。

#### 【0038】

本発明の医薬組成物は、投与経路次第で医薬的に許容される担体や添加物を共に含むものであってもよい。このような担体および添加物の例として、水、医薬的に許容される無機塩、医薬的に許容される有機溶媒、コラーゲン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム、水溶性デキストラン、カルボキシメチルスターチナトリウム、ペクチン、メチルセルロース、エチルセルロース、キサンタンガム、アラビアゴム、カゼイン、ゼラチン、寒天、ジグリセリン、プロピレングリコール、ポリ

エチレングリコール、ワセリン、パラフィン、ステアリルアルコール、ステアリン酸、ヒト血清アルブミン（HSA）、マンニトール、ソルビトール、ラクトース、医薬添加物として許容される界面活性剤などが挙げられる。使用される添加物は、剤型に応じて上記の中から適宜あるいは組合せて選択されるが、これらに限定されるものではない。

#### 【実施例】

##### 【0039】

以下、実施例および参考例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1. 生来のヒト型化PM-1抗体/サブタイプ1/サブタイプ2を含む抗体組成物の発現

##### 発現細胞の構築

##### (1) ヒトIL-6レセプター抗体PM-1の調製

Hirataらの方法（J. Immunol., 143:2900-2906, 1989）により作成した抗IL-6R抗体MT18をCNBrにより活性化させたセファロース4B（Pharmacia-Fine Chemicals製、Piscataway, NJ）と添付の処方にしたがって結合させ、IL-6R（Yamasakiら、Science 241:825-828, 1988）を精製した。

##### 【0040】

すなわち、ヒトミエローマ細胞株U266を1%ジギトニン（Wako Chemicals製）、10 mM トリエタノールアミン（pH 7.8）および0.15 M NaClを含む1 mM p-パラアミノフェニルメタンスルフォニルフルオリドハイドロクロリド（Wako Chemicals製）（ジギトニン緩衝液）で可溶化し、セファロース4Bビーズと結合させたMT18抗体と混合した。その後、ビーズをジギトニン緩衝液で6回洗浄し、免疫に用いる部分精製IL-6Rとした。

BALB/cマウスを $3 \times 10^9$ 個のU266細胞から得た上記部分精製IL-6Rで10口おきに4回免疫し、その後常法によりハイブリドーマを作成した。成長陽性ウェルからのハイブリドーマ培養上清を下記の方法にてIL-6Rへの結合活性を調べた。 $5 \times 10^7$ 個のU266細胞を35S-メチオニン（2.5 mCi）で標識し、上記ジギトニン緩衝液で可溶化した。

##### 【0041】

可溶化したU266細胞を0.04 ml容量のセファロース4Bビーズと結合させたMT18抗体と混合し、その後、ジギトニン緩衝液で6回洗浄し、0.25 mlのジギトニン緩衝液（pH 3.4）により35S-メチオニン標識IL-6Rを流出させ、0.025 mlの1M Tris（pH 7.4）で中和した。0.05 mlのハイブリドーマ培養上清を0.01 mlのProtein Gセファロース（Pharmacia製）と混合した。

洗浄した後、セファロースを上記で調製した0.005 mlの $^{35}\text{S}$ 標識IL-6R溶液とともにインキュベートした。免疫沈降物質をSDS-PAGEで分析し、IL-6Rと反応するハイブリドーマ培養上清を調べた。その結果、反応陽性ハイブリドーマクローンPM-1を樹立した。ハイブリドーマPM-1から産生されるIL-6R抗体PM-1は、IgG1 $\kappa$ 型のサブタイプを有する。

##### 【0042】

ハイブリドーマPM-1が産生する抗体のヒトIL-6Rに対するIL-6の結合阻害活性をヒトミエローマ細胞株U266を用いて調べた。ヒト組換え型IL-6を大腸菌より調製し（Hiranoら、Immunol. Lett., 17:41, 1988）、ボルトン-ハンター試薬（New England Nuclear, Boston, MA）により $^{125}\text{I}$ 標識した（Tagaら、J. Exp. Med. 166:967, 1987）。 $4 \times 10^5$ 個のU266細胞を、100倍量の過剰な非標識IL-6の存在下で室温にて、1時間、70%（v/v）のハイブリドーマPM-1の培養上清及び14000CPMの $^{125}\text{I}$ 標識IL-6とともに培養した。70  $\mu\text{l}$ のサンプルを400  $\mu\text{l}$ のマイクロフュージポリエチレンチューブに入れた300  $\mu\text{l}$ のFCS上に重層し、遠心の後、細胞上の放射活性を測定した。その結果、ハイブリドーマPM-1が産生する抗体は、IL-6のIL-6Rに対する結合を阻害することが明らかとなった。

##### 【0043】

##### (2) ヒト型抗体hPM-1の作成

国際特許出願公開番号W092/19759号公報の実施例10に記載されたヒトエロンゲーションファクターI  $\alpha$  プロモーターを利用し、特開平8-99902号公報の参考例2に記載された方

法に準じて、L鎖およびH鎖両遺伝子を含む単一の発現ベクターを作成し、この発現ベクターをCHO細胞に挿入することにより作製したヒト型化PM-1抗体（抗ヒトIL-6レセプター抗体）を産生するCHO細胞株を用いて試験した。得られたヒト型化抗体のヒトIL-6Rへの結合能はELISAにて確認した。さらに、hPM-1はマウス抗体およびキメラ抗体と同様に、ヒトIL-6のヒトIL-6Rへの結合を阻害した。

#### 【0044】

##### 細胞培養とヒト型化PM-1抗体の発現

大量のヒト型化PM-1抗体を得るために、発現細胞を市販の無血清培地またはその改変培地で培養した。培養条件は、一般にCHO細胞の培養に適した環境で行った。培地中には目的抗体の発現量を増やすため、種々の添加物を加えることが可能であった。その中で、各種ペプトンは一般に広く用いられている。牛肉、豚肉、大豆、米、魚肉などに由来するペプトンが広く市販されているが、その効果は細胞株との相性による。一般に動物由来ペプトンで発現効果が高い。各種ペプトンによる効果を調べる過程で、魚肉（カツオ）に由来するペプトンを用いると発現量に効果があることがわかった。

#### 【0045】

発現された抗体の精製は、一般的なカラムクロマトグラフィー、例えばアフィニティー・クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水クロマトグラフィー、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィーなどの組み合わせによって行った。魚肉に由来するペプトンを用いてCHO細胞を培養して発現されたヒト型化PM-1抗体の分子種に、牛肉由来ペプトンを用いた時には僅かしか見られない分子種が見られた。この分子種は、植物由来ペプトンを用いた場合にも見られた。

#### 【0046】

##### 実施例2. ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1及びサブタイプ2の分析

##### 材料および方法

試料として、ヒト型化PM-1抗体の生来型（Mainと称する場合がある）、当該抗体のサブタイプ1及びサブタイプ2、並びに比較標準ペプチドとして、ヒト型化PM-1抗体のC-末端に存在し、C-末端のGlyが除去されたペプチドSer-Leu-Ser-Leu-Ser-Pro（SLSLSP）及びそのC-末端Proがアミド化されたペプチドSLSLSP-NH<sub>2</sub>を使用した。ペプチドSLSLSP及びアミド化ペプチドSLSLSP-NH<sub>2</sub>は化学合成した。ヒト型化PM-1抗体 Main、当該抗体のサブタイプ1及びサブタイプ2は、実施例1で得たヒト型化PM-1抗体を、下記の方法で、カラムクロマトグラフィーにより分取、精製することにより得た。

#### 【0047】

カラムとしてPoly LC 製 Poly CAT A (100×4.6 mm)、ガードカラムとしてPoly LC 製 Poly CAT A Javelin guard (10×4.0 mm)を使用した。移動相として、移動相A（0.05% NaN<sub>3</sub>を含むpH 6.1の25 mM 2-[N-モルホリノ]エタンスルホン酸緩衝液）及び移動相B（250 mM 酢酸ナトリウムと0.05% NaN<sub>3</sub>を含むpH 6.1の25 mM 2-[N-モルホリノ]エタンスルホン酸緩衝液）を使用した。グラジエント条件は、移動相Bの比率を、0分/35%、5分/35%、59分/60%、60分/100%とした。流速を1ml/分とし、280nmにおける紫外可視吸光度により検出した。

#### 【0048】

##### ヒト型化PM-1抗体 Main、サブタイプ1及びサブタイプの酵素消化

200 µg相当量のヒト型化PM-1抗体 Main、サブタイプ1及びサブタイプ2を、それぞれ簡易限外濾過カートリッジ（ミニセント、東ソー製）に入れ、変性剤溶液（1 M グアニジン、1 mM エチレンジアミン四酢酸を含むpH 8.3の100 mM 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール-塩酸緩衝液）を加えて液量を500 µLとした。カートリッジを5℃で遠心し、液量を約50 µLとした。マイクロチューブに試料を回収し、変性剤溶液（前記と同一組成）を加え全量を300 µLとした。

#### 【0049】

各溶液にDTT溶液（162 mMジチオスレイトールを含む変性剤溶液）50 µLを加えヘッドスペースをN<sub>2</sub>置換し、恒温ブロック中37℃で時間放置した。さらに、IAA溶液（417 mMヨウ

ド酢酸を含む0.2 N水酸化ナトリウム溶液) 45  $\mu$ Lを加え、遮光下37℃で30分間放置した。反応液を回収し、それぞれの試料について、透析チューブを用いてTris-HCl緩衝液(2 M尿素を含むpH 8.0の100 mM 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール-塩酸緩衝液) 500 mLに対し、5℃で約20時間透析(透析膜:m.w. = 8000, スペクトラム製)を行なった。透析した試料を回収し、それぞれにトリプシン溶液(トリプシンをTris-HCl緩衝液(前記と同じ組成)に溶解し250 ng/ $\mu$ Lとする)を20  $\mu$ L加え、37℃で16時間放置した。

#### 【0050】

##### トリプシン処理物及び比較標準ペプチドの分析

上記の通りトリプシン処理した試料40  $\mu$ Lを液体クロマトグラフ-質量分析(LC-MS/MS)測定に供した。標準ペプチド溶液、即ち、SLSLSP溶液(SLSLSPを水に溶解し4  $\mu$ Mとする)及びSLSLSP-NH<sub>2</sub>溶液(SLSLSP-NH<sub>2</sub>を水に溶解し4  $\mu$ Mとする)については、50  $\mu$ Lを液体クロマトグラフ-質量分析に供した。

#### 【0051】

液体クロマトグラフ条件は次の通りとした。即ち、カラムとしてワイエムシ製YMC-Pack ODS (250×2.0 mm、5  $\mu$ m、300Å)を使用した。移動相として、移動相A(0.1%トリフルオロ酢酸を含む5%アセトニトリル溶液)及び移動相B(0.1%トリフルオロ酢酸を含む95%アセトニトリル溶液)を使用した。グラジエント条件は、移動相Bの比率を、0分/0%、10分/0%、120分/35%、140分/35%とした。流速を0.2 mL/分とし、215 nmにおける紫外可視吸光度により検出を行なった。

#### 【0052】

##### トリプシン処理物及び比較標準ペプチドの分析結果

##### (1) 比較標準ペプチド断片の測定

##### (a) ペプチド断片SLSLSPの測定

図1～図3は、ペプチド断片SLSLSPの液体クロマトグラフ(LC)-質量分析(MS)結果を示す。図1の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図2はマススペクトルを示し、そして図3はズームスキンスペクトルを示す。得られた分子量(602.2)は、理論値(602.3; モノアイソトピック分子量)とほぼ一致した(図2及び図3)。

#### 【0053】

##### (b) ペプチド断片SLSLSP-NH<sub>2</sub>の測定

図4～図6は、ペプチド断片SLSLSP-NH<sub>2</sub>の液体クロマトグラフ(LC)-質量分析(MS)結果を示す。図4の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図5はマススペクトルを示し、そして図6はズームスキンスペクトルを示す。得られた分子量(601.2)は、理論値(601.3; モノアイソトピック分子量)とほぼ一致した(図5及び図6)。

#### 【0054】

##### (c) ペプチド断片SLSLSPとSLSLSP-NH<sub>2</sub>の混合の測定

図7～図9は、ペプチド断片SLSLSPとSLSLSP-NH<sub>2</sub>の混合溶液の、液体クロマトグラフ(LC)-質量分析(MS)結果を示す。図7の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図8は、図7における保持時間44分でのピークのマススペクトルを示し、そして図9は、図7における保持時間51分でのピークのマススペクトルを示す。両ペプチド断片は上記の液体クロマトグラフィーの条件で完全に分離された。

#### 【0055】

##### (2) ヒト型化PM-1抗体のH鎖C末端構造の解析

##### (a) ヒト型化PM-1抗体(Main)のH鎖C末端構造の解析

図10のAにヒト型化PM-1抗体(Main)を還元/カルボキシメチル化し、トリプシン消化したペプチドのペプチドマップを示す。H鎖C末端断片の構造を調べるため、図10のBにおいてSLSLSPG(m/z 660.3±0.5における選択的モニタリング)の、図10のCにおいてSLS

LSP-NH<sub>2</sub> (m/z 602.3±0.5における選択的モニタリング)の、そして図10のDにおいてSLSLSP (m/z 603.3±0.5における選択的モニタリング)の分子量についてのMSクロマトグラムを示す。SLSLSPGに相当するピークが49.7分に検出されたが、SLSLSP-NH<sub>2</sub>及びSLSLSPの分子量を持つペプチドフラグメントは存在しなかった。

#### 【0056】

図11～図13は、ヒト型化PM-1抗体(Main)を還元/カルボキシメチル化し、トリブシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析の結果を示す。図11の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図12は、図11における保持時間50分でのピークのマススペクトルを示し、そして図13は、図11と同じピークのズームスキャンスペクトルを示す。これらの結果から、検出されたピークはアミノ酸配列SLSLSPGを持つ事が示された。従って、ヒト型化PM-1抗体(Main)の両方のH鎖C末端は-SLSLSPG配列を持つ事が示された。

#### 【0057】

(b) ヒト型化PM-1抗体サブクラス1のH鎖C末端構造の解析

図14のAにヒト型化PM-1抗体サブタイプ1を還元/カルボキシメチル化し、トリブシン消化したペプチドのペプチドマップを示す。H鎖C末端断片の構造を調べるため、図14のBにおいてSLSLSPG (m/z 660.3±0.5における選択的モニタリング)の、図14のCにおいてSLSLSP-NH<sub>2</sub> (m/z 602.3±0.5における選択的モニタリング)の、そして図14のDにおいてSLSLSP (m/z 603.3±0.5における選択的モニタリング)の分子量についてのMSクロマトグラムを示す。SLSLSPGに相当するピークが47.7 minに検出されたのに加え、SLSLSP-NH<sub>2</sub>に相当するピークも46.2 minに認められた。(図14のDにおいて分子量603.3のピークが46 min付近に認められたが、保持時間からSLSLSPではない。)

#### 【0058】

図15～図17は、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1を還元/カルボキシメチル化し、トリブシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析の結果(図14のBのピークについて)を示す。図15の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図16は、図15における保持時間48分でのピークのマススペクトルを示し、そして図17は、図16と同じピークのズームスキャンスペクトルを示す。

#### 【0059】

図18～図20は、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1を還元/カルボキシメチル化し、トリブシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析の結果(図14のCのピークについて)を示す。図18の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図19は、図18における保持時間46分でのピークのマススペクトルを示し、そして図20は、図19と同じピークのズームスキャンスペクトルを示す。

これらの結果から、検出されたピークはアミノ酸配列SLSLSPG及びSLSLSP-NH<sub>2</sub>を持つ事が示された。従って、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1のH鎖C末端の一方は-SLSLSPG、もう一方は-SLSLSP-NH<sub>2</sub>配列を持つ事が示された。

#### 【0060】

(c) ヒト型化PM-1抗体サブクラス2のH鎖C末端構造の解析

図21のAにヒト型化PM-1抗体サブタイプ2を還元/カルボキシメチル化し、トリブシン消化したペプチドのペプチドマップを示す。H鎖C末端断片の構造を調べるため、図21のBにおいてSLSLSPG (m/z 660.3±0.5における選択的モニタリング)の、図21のCにおいてSLSLSP-NH<sub>2</sub> (m/z 602.3±0.5における選択的モニタリング)の、そして図21のDにおいてSLSLSP (m/z 603.3±0.5における選択的モニタリング)の分子量についてのMSクロマトグラムを示す。SLSLSPGに相当するピークが僅かに検出されたが、SLSLSP-NH<sub>2</sub>に相当するピークがより強く検出された。(図26のDにおいて分子量603.3のピークが45分付近に認められたが、保持時間から考えてSLSLSPではない。)

#### 【0061】

図22～図24は、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ2を還元/カルボキシメチル化し、トリブシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析の結果を示す。図22の上段は215nmの紫外線で検出

したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。図23は、図22における保持時間45分でのピークのマススペクトルを示し、そして図24は、図23と同じピークのズームスキンスペクトルを示す。これらの結果から、検出されたピークはアミノ酸配列 SLSLSP-NH<sub>2</sub>を持つ事が示された。従って、ヒト型化PM-1抗体サブクラス2の両方のH鎖C末端は-SLSLSP-NH<sub>2</sub>配列を持つ事が示された。

#### 【0062】

#### 実施例3. ヒト型化PM-1抗体サブグループ1及びサブグループ2の生物活性の測定

##### (1) IL-6受容体結合活性の測定

##### (a) 測定方法

測定方法は、下記の工程により行なった。

1) pH 9.6の炭酸ナトリウム緩衝液を用いて5  $\mu$ g/mLに希釈した抗IL-6 レセプター抗体を、イムノプレートの各ウエルに100  $\mu$ Lずつ添加し、1晩以上冷所で放置する。

2) 各ウエルを0.05%ポリソルベート20を含むリン酸緩衝生理食塩水（以後RB）300  $\mu$ Lで3回洗浄する。

3) 各ウエルに1%の牛血清アルブミンを含むpH 8.1のトリス塩酸緩衝液（以後DB）200  $\mu$ Lを加え、室温で2時間以上放置する。

#### 【0063】

4) ウエル内の溶液を捨てた後、DBを用いて0.1  $\mu$ g/mLに希釈した可溶性IL-6受容体100  $\mu$ Lを各ウエルに添加し、室温で2時間放置する。

5) 各ウエルをRB 300  $\mu$ Lで3回洗浄する。

6) 一定のビオチン化MRAを含むDBを用いて段階希釈した試料溶液100  $\mu$ Lを各ウエルに添加し、室温で1時間放置する。

7) 各ウエルをRB 300  $\mu$ Lずつで3回洗浄する。

8) DBを用いて0.5  $\mu$ g/mLに希釈したアルカリフォスファターゼ標識ストレプトアビジン100  $\mu$ Lを各ウエルに添加し、室温で1時間放置する。

#### 【0064】

9) イムノプレートの各ウエルをRB 300  $\mu$ Lで5回洗浄する。

10) 発色試薬（SIGMA FAST p-Nitrophenyl Phosphate）を水で溶解し、各ウエルに100  $\mu$ L添加し、室温で30分間放置する。

11) 各ウエルの反応液の405 nmにおける吸光度と655nmにおける吸収度の差を求める。

12) 得られた吸光度から、平行線検定法（3+3）により各試料溶液の結合活性を算出する。

#### 【0065】

##### (b) 結果

結果を下記の表1に示す。

【表1】

表1

ヒト型化PM-1抗体サブタイプの抗原結合性

サブタイプ	活性	比活性
生来型 (Main)	$1.04 \times 10^3$	100%
サブタイプ1	$1.13 \times 10^3$	109%
サブタイプ2	$1.12 \times 10^3$	108%

【0066】

表1の結果から、ヒト型化PM-1抗体(Main)、サブタイプ1、およびサブタイプ2は、実質的に同じ抗原結合性をしめすことが明らかである。

【0067】

(2) KT-3細胞増殖阻害

(a) 測定方法

測定方法は下記の工程により行なった。

1) マイクロプレートの各ウエルに、RPMI培地で2 ng/mLに希釈したIL-6溶液50  $\mu$ Lを添加した後、RPMI培地で段階希釈した試料溶液を50  $\mu$ L加える。なお、ブランクのウエルにはRPMI培地50  $\mu$ Lを加える。

2) 更に、各ウエルにRPMI培地を用いて $5 \times 10^4$  cells/mLに調整したKT-3細胞浮遊液を100  $\mu$ L添加し、CO<sub>2</sub>インキュベーター内で3日間培養する。

【0068】

3) 各ウエルに、RPMI培地で適当に希釈した<sup>3</sup>H-チミジン溶液50  $\mu$ Lを添加し、CO<sub>2</sub>インキュベーター内で6時間培養する。

4) マイクロプレート内の細胞を、セルハーベスターを用いてガラスフィルタートに捕集する。

5) ガラスフィルターを電子レンジを用いて10分間乾燥した後、ホットプレート等で加熱しながら固形シンチレーターをガラスフィルターに染み込ませる。

6) 液体シンチレーションカウンターを用いて放射活性(cpm)を測定する。

7) 得られた放射活性から、平行線検定法(4+4)により各試料溶液の生物活性を算出する。

【0069】

結果を下記の表2に示す。

【表2】

表2

ヒト型化PM-1抗体サブタイプの細胞増殖阻害活性

サブタイプ	活性	比活性
生来型(Main)	$1.00 \times 10^3$	100%
サブタイプ1	$1.02 \times 10^3$	102%
サブタイプ2	$1.01 \times 10^3$	101%

【0070】

表2の結果から、ヒト型化PM-1抗体(Main)、サブタイプ1、およびサブタイプ2は、実質的に同じ細胞増殖阻害活性を示すことが明らかである。

【図面の簡単な説明】

【0071】

【図1】図1は、ペプチド断片SLSLSPの液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)における液体クロマトグラフィーの結果を示し、上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図2】図2は、ペプチド断片SLSLSPの液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)におけるマススペクトルを示す。

【図3】図3は、ペプチド断片SLSLSPの液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)



におけるズームスキャンスペクトルを示す。

【図4】図4は、ペプチド断片SLSLSP-NH<sub>2</sub>の液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)における液体クロマトグラフィーの結果を示し、上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図5】図5は、ペプチド断片SLSLSP-NH<sub>2</sub>の液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)におけるマススペクトルを示す。

【図6】図6は、ペプチド断片SLSLSP-NH<sub>2</sub>の液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)におけるズームスキャンスペクトルを示す。

【図7】図7は、ペプチド断片SLSLSPとSLSLSP-NH<sub>2</sub>の混合溶液の、液体クロマトグラフ(LC) - 質量分析(MS)における液体クロマトグラフィーの結果を示し、上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図8】図8は、図7における保持時間44分でのピークのマススペクトルを示す。

【図9】図9は、図7における保持時間51分でのピークのマススペクトルを示す。

【図10】図10において、Aは、ヒト型化PM-1抗体(Main)を還元/カルボキシメチル化しトリプシン消化したペプチドのペプチドマップを示し；BにおいてSLSLSPG (m/z 660.3±0.5における選択的モニタリング) の、CにおいてSLSLSP-NH<sub>2</sub> (m/z 602.3±0.5における選択的モニタリング) の、そしてDにおいてSLSLSP (m/z 603.3±0.5における選択的モニタリング) の分子量についてのMSクロマトグラムを示す。

【図11】図11は、ヒト型化PM-1抗体(Main)を還元/カルボキシメチル化しトリプシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析の結果を示し、上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図12】図12は、図11における保持時間50分でのピークのマススペクトルを示す。

【図13】図13は、図11と同じピークのズームスキャンスペクトルを示す。

【図14】図14において、Aは、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1をトリプシン消化し、還元/カルボキシメチル化したペプチドのペプチドマップを示し；BにおいてSLSLSPG (m/z 660.3±0.5における選択的モニタリング) の、CにおいてSLSLSP-NH<sub>2</sub> (m/z 602.3±0.5における選択的モニタリング) の、そしてDにおいてSLSLSP (m/z 603.3±0.5における選択的モニタリング) の分子量についてのMSクロマトグラムを示す。

【図15】図15は、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1を還元/カルボキシメチル化しトリプシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析における液体クロマトグラフィー(LC)の結果(図17のBのピークについて)を示し、の上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図16】図16は、図15における保持時間48分でのピークのマススペクトルを示す。

【図17】図17は、図16と同じピークのズームスキャンスペクトルを示す。

【図18】図18は、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ1を還元/カルボキシメチル化し、トリプシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析における液体クロマトグラフィー(LC)の結果(図17のCのピークについて)を示し、上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図19】図19は、図18における保持時間46分でのピークのマススペクトルを示す。

【図20】図20は、図19と同じピークのズームスキャンスペクトルを示す。

【図21】図21において、Aは、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ2を還元/カルボキシメチル化し、トリプシン消化したペプチドのペプチドマップを示し；BにおいてSLSLSPG (m/z 660.3±0.5における選択的モニタリング) の、CにおいてSLSLSP-NH<sub>2</sub> (m/z 602.3±0.5における選択的モニタリング) の、そしてDにおいてSLSLSP (m/z 603.3±0.5における選択的モニタリング) の分子量についてのMSクロマトグラムを示す。

【図22】図22は、ヒト型化PM-1抗体サブタイプ2を還元/カルボキシメチル化し、トリプシン消化したペプチドのLC-MS/MS分析における液体クロマトグラフィー(LC)の結果を示し、上段は215nmの紫外線で検出したクロマトグラムを示し、下段はベースピーククロマトグラムを示す。

【図 2 3】 図 23 は、図 22 における保持時間 45 分でのピークのマススペクトルを示す。

【図 2 4】 図 24 は、図 23 と同じピークのズームスキンスペクトルを示す。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> Chuugai Seiyaku kabushiki Kaisha

<120> Subtypes of humanized antibody against interleukin-6 receptor

<130> 1043081

<160> 2

<210> 1

<211> 448

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<221>

<222>

<223> Amino acid sequence of C chain of humanized antibody PM-1 against interleukin-6 receptor

<400> 1

Gln Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Arg Pro Ser Gln  
5 10 15

Thr Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Ser Gly Tyr Ser Ile Thr Ser Asp  
20 25 30

His Ala Trp Ser Trp Val Arg Gln Pro Pro Gly Arg Gly Leu Glu Trp  
35 40 45

Ile Gly Tyr Ile Ser Tyr Ser Gly Ile Thr Thr Tyr Asn Pro Ser Leu  
50 55 60

Lys Ser Arg Val Thr Met Leu Arg Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser  
65 70 75 80

Leu Arg Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys  
85 90 95

Ala Arg Ser Leu Ala Arg Thr Thr Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly  
100 105 110

Ser Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe  
115 120 125

Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu  
130 135 140

Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp  
145 150 155 160

Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu  
165 170 175

Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser  
180 185 190

Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro  
195 200 205

Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys  
210 215 220

Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro  
225 230 235 240

Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser  
245 250 255

Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp  
260 265 270

Pro	Glu	Val	Lys	Phe	Asn	Trp	Tyr	Val	Asp	Gly	Val	Glu	Val	His	Asn		
		275					280					285					
Ala	Lys	Thr	Lys	Pro	Arg	Glu	Glu	Gln	Tyr	Asn	Ser	Thr	Tyr	Arg	Val		
	290					295					300						
Val	Ser	Val	Leu	Thr	Val	Leu	His	Gln	Asp	Trp	Leu	Asn	Gly	Lys	Glu		
305					310					315					320		
Tyr	Lys	Cys	Lys	Val	Ser	Asn	Lys	Ala	Leu	Pro	Ala	Pro	Ile	Glu	Lys		
				325				330						335			
Thr	Ile	Ser	Lys	Ala	Lys	Gly	Gln	Pro	Arg	Glu	Pro	Gln	Val	Tyr	Thr		
			340					345					350				
Leu	Pro	Pro	Ser	Arg	Asp	Glu	Leu	Thr	Lys	Asn	Gln	Val	Ser	Leu	Thr		
		355					360					365					
Cys	Leu	Val	Lys	Gly	Phe	Tyr	Pro	Ser	Asp	Ile	Ala	Val	Glu	Trp	Glu		
	370					375					380						
Ser	Asn	Gly	Gln	Pro	Glu	Asn	Asn	Tyr	Lys	Thr	Thr	Pro	Pro	Val	Leu		
385					390					395					400		
Asp	Ser	Asp	Gly	Ser	Phe	Phe	Leu	Tyr	Ser	Lys	Leu	Thr	Val	Asp	Lys		
				405					410					415			
Ser	Arg	Trp	Gln	Gln	Gly	Asn	Val	Phe	Ser	Cys	Ser	Val	Met	His	Glu		
			420					425					430				
Ala	Leu	His	Asn	His	Tyr	Thr	Gln	Lys	Ser	Leu	Ser	Leu	Ser	Pro	Gly		
	435						440					445					

<210>2

<211>214

<212>PRT

<213>Artificial Sequence

<220>

<221>

<222>

<223>Amino acid sequence of L chain of humanized antibody PM-1 against interleukin-6 receptor

<400>2


Asp	Ile	Gln	Met	Thr	Gln	Ser	Pro	Ser	Ser	Leu	Ser	Ala	Ser	Val	Gly		
			5					10						15			
Asp	Arg	Val	Thr	Ile	Thr	Cys	Arg	Ala	Ser	Gln	Asp	Ile	Ser	Ser	Tyr		
		20						25					30				
Leu	Asn	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Lys	Ala	Pro	Lys	Leu	Leu	Ile		
		35					40					45					
Tyr	Tyr	Thr	Ser	Arg	Leu	His	Ser	Gly	Val	Pro	Ser	Arg	Phe	Ser	Gly		
	50					55				60							
Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Phe	Thr	Ile	Ser	Ser	Leu	Gln	Pro		
	65				70					75				80			
Glu	Asp	Ile	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Gln	Gly	Asn	Thr	Leu	Pro	Tyr		
			85					90					95				
Thr	Phe	Gly	Gln	Gly	Thr	Lys	Val	Glu	Ile	Lys	Arg	Thr	Val	Ala	Ala		
		100						105					110				
Pro	Ser	Val	Phe	Ile	Phe	Pro	Pro	Ser	Asp	Glu	Gln	Leu	Lys	Ser	Gly		
		115					120					125					
Thr	Ala	Ser	Val	Val	Cys	Leu	Leu	Asn	Asn	Phe	Tyr	Pro	Arg	Glu	Ala		
	130					135					140						


[illegible]

【書類名】 図面

【図 1】

図 1

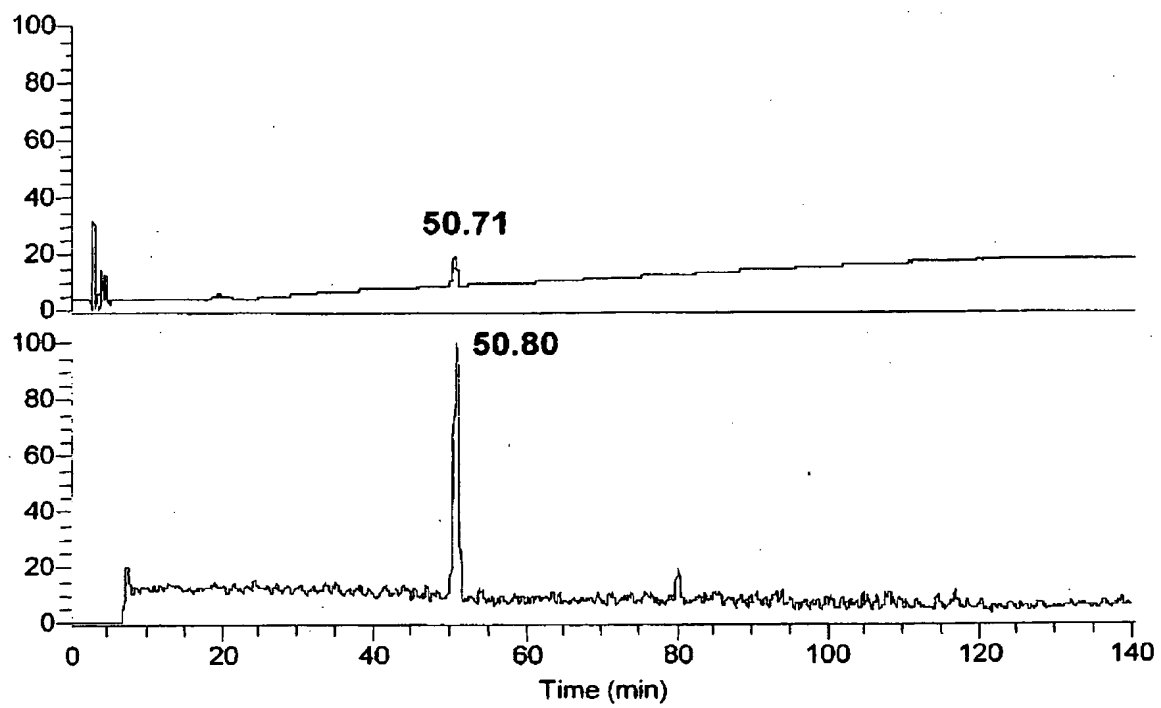

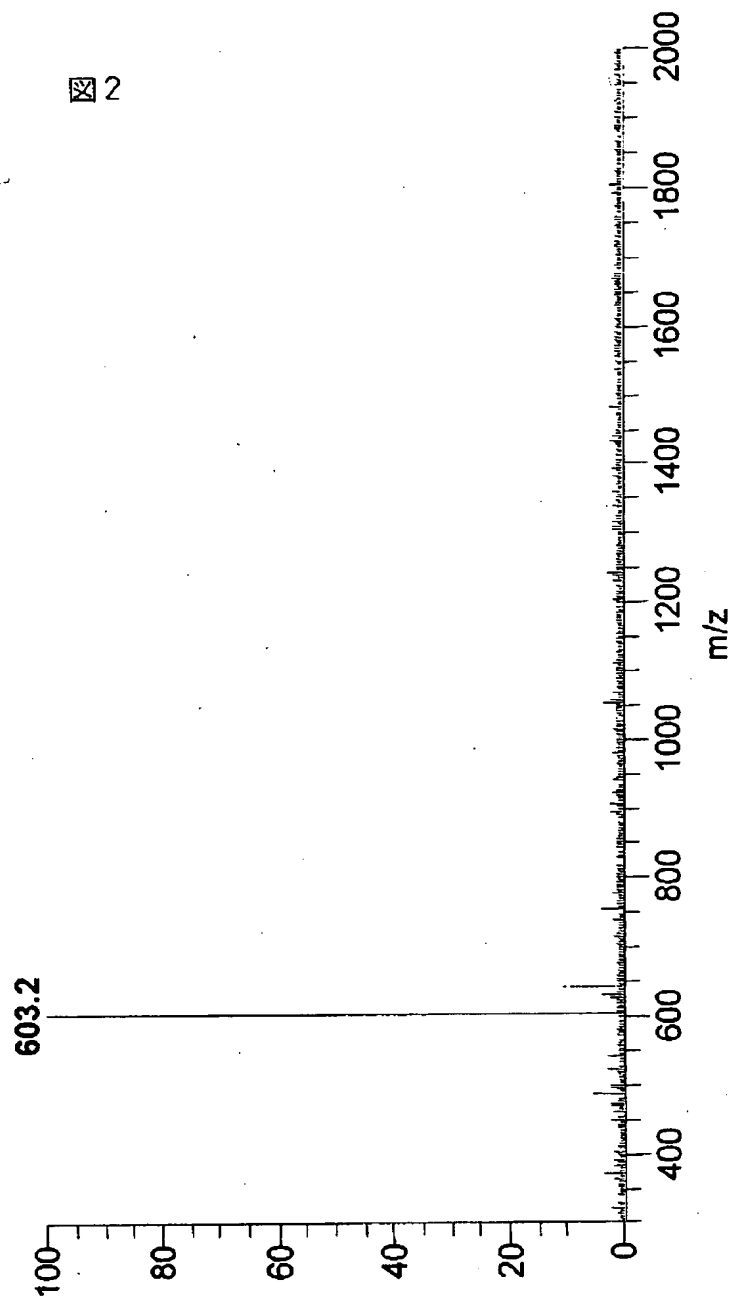

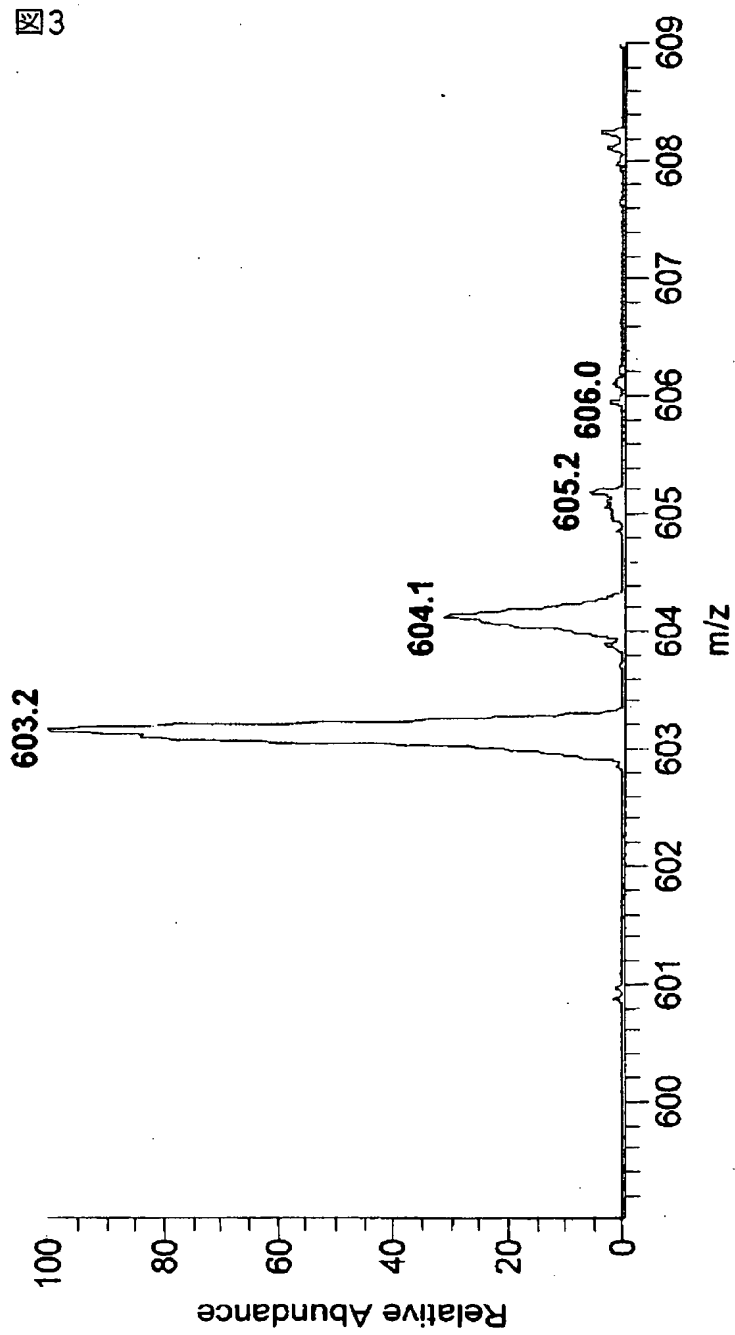




图 4

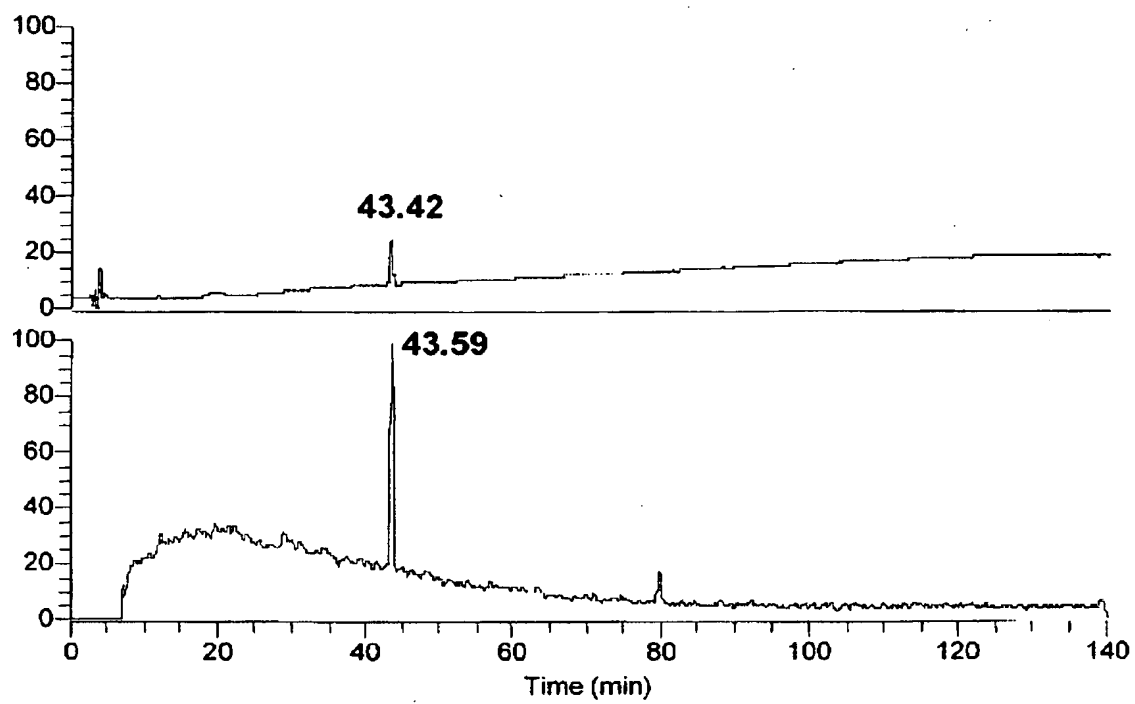


図5



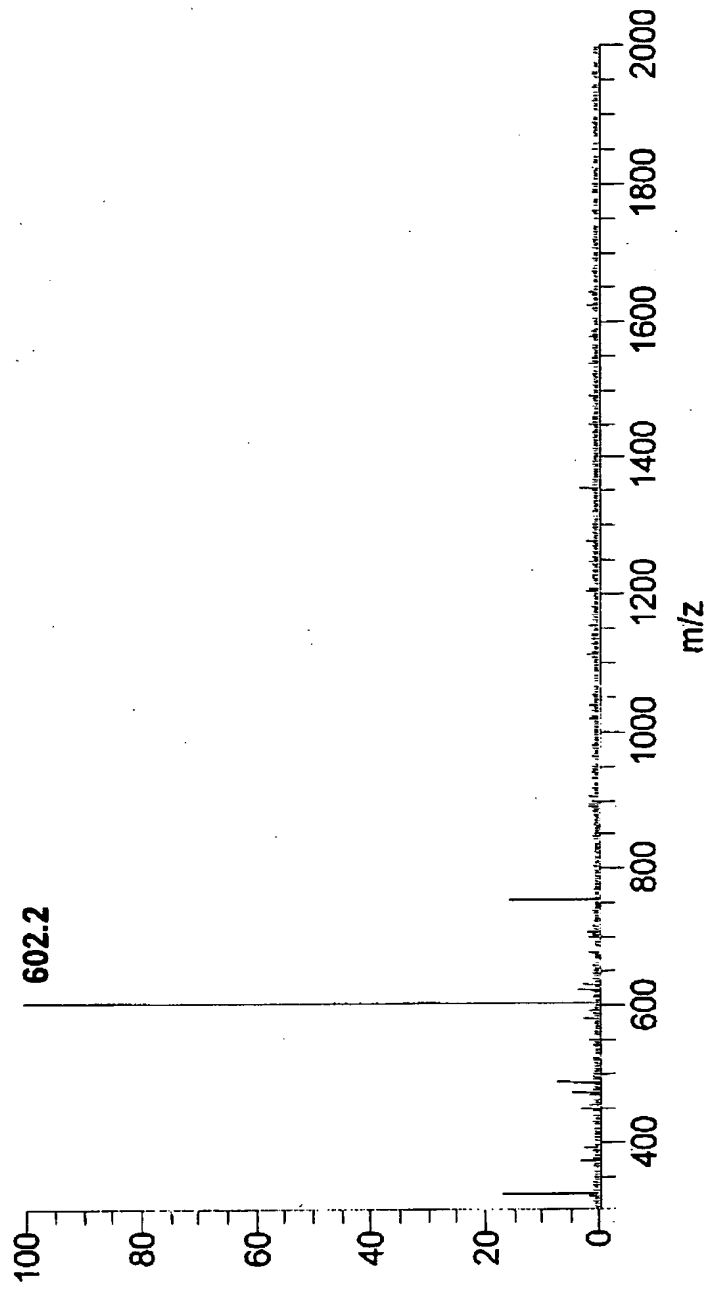



图 6

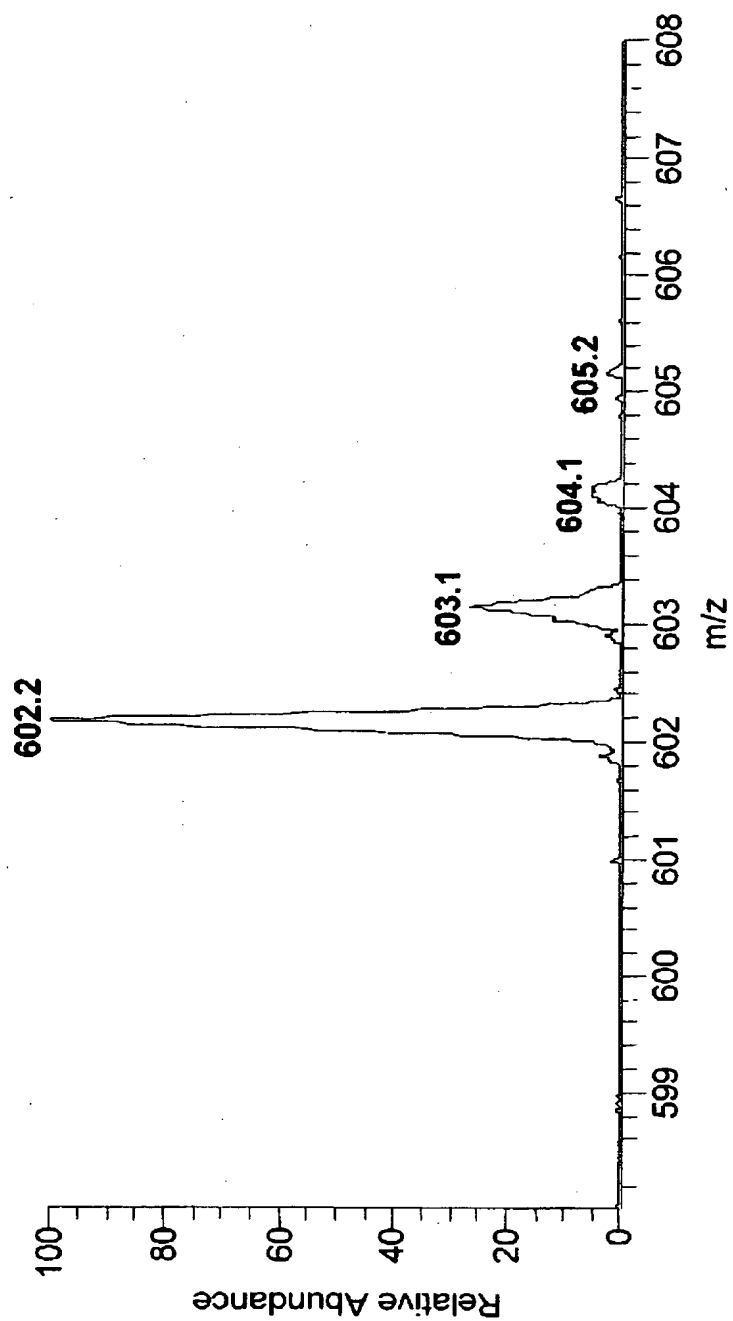


7

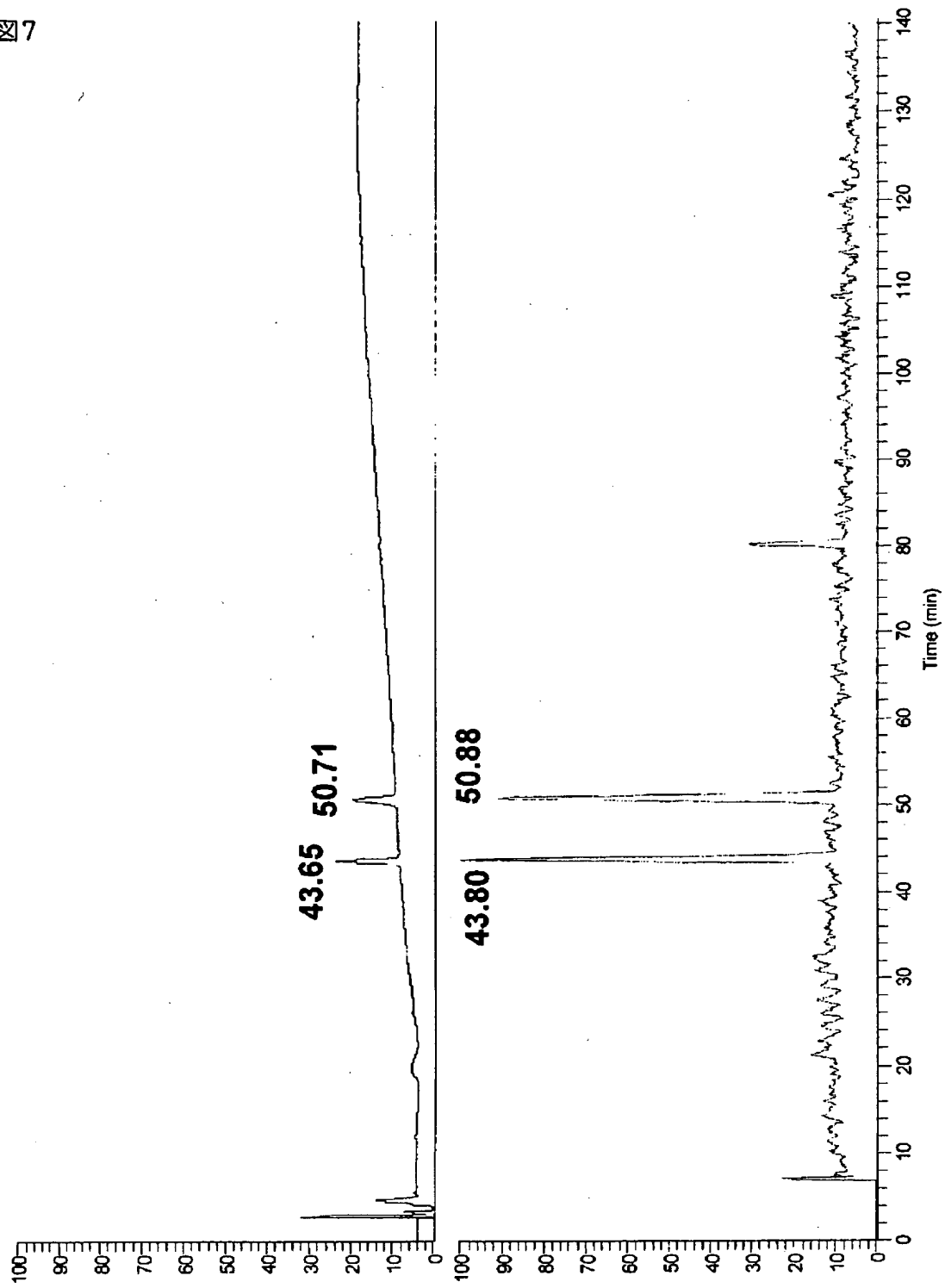

8

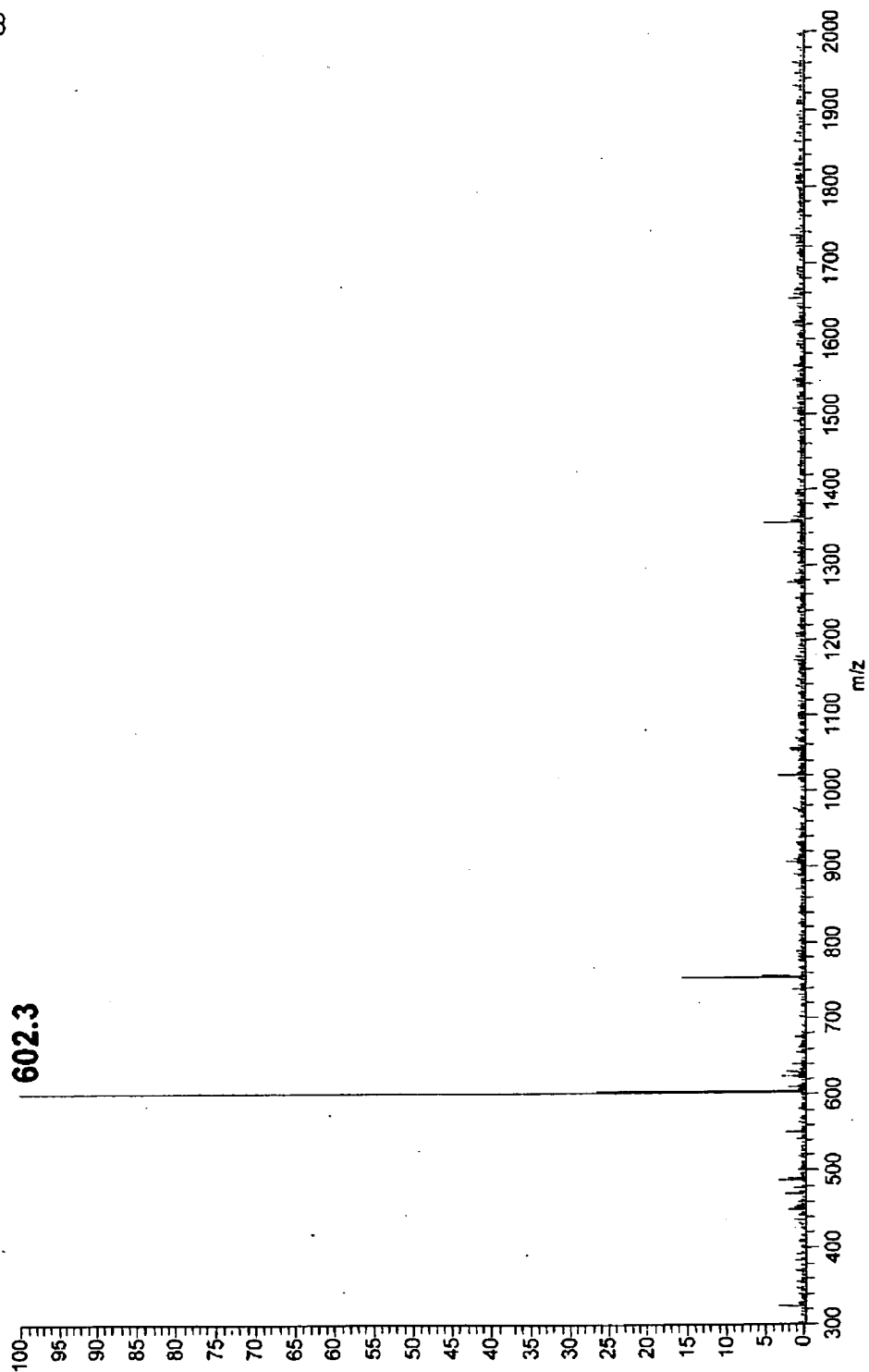

9

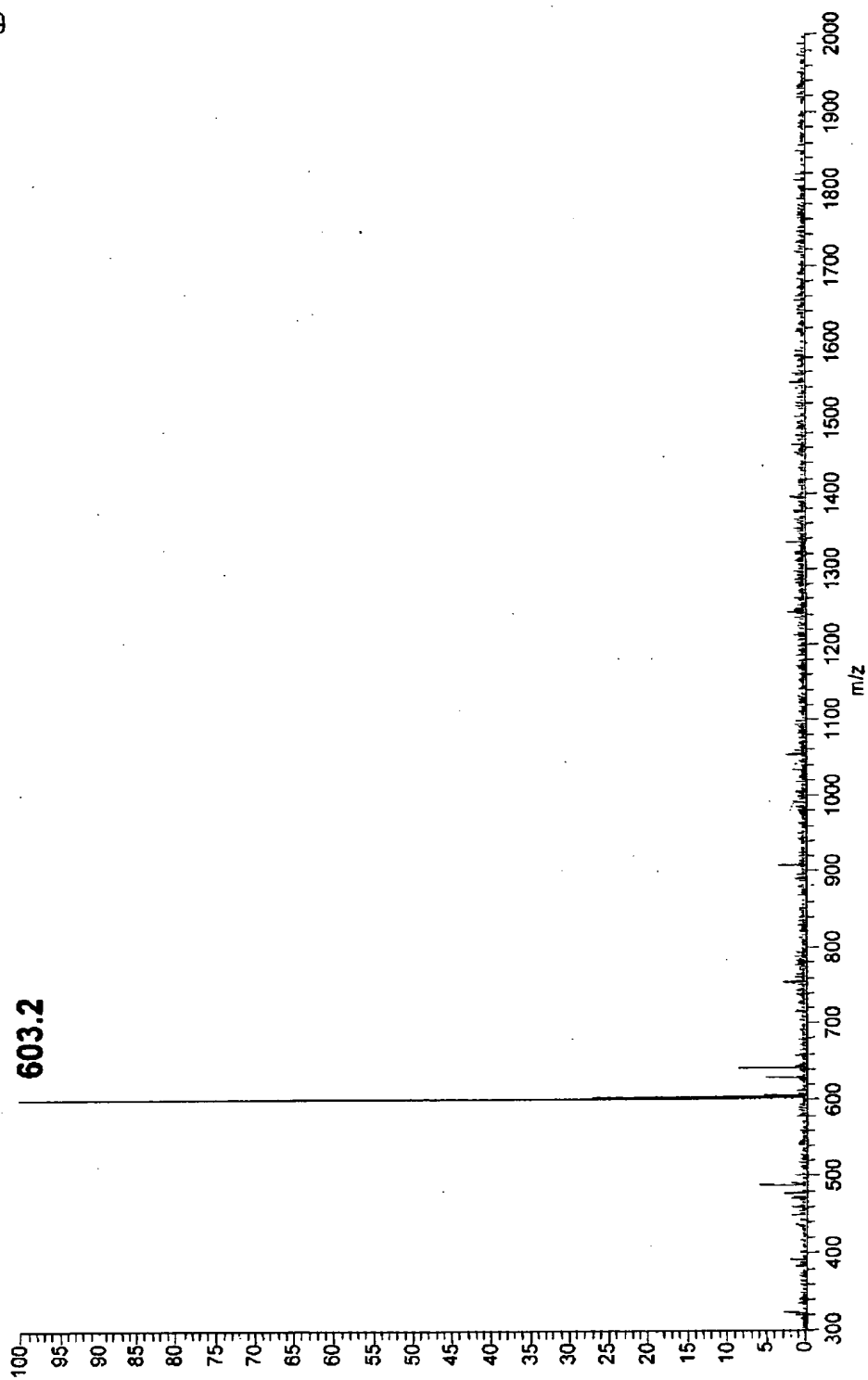

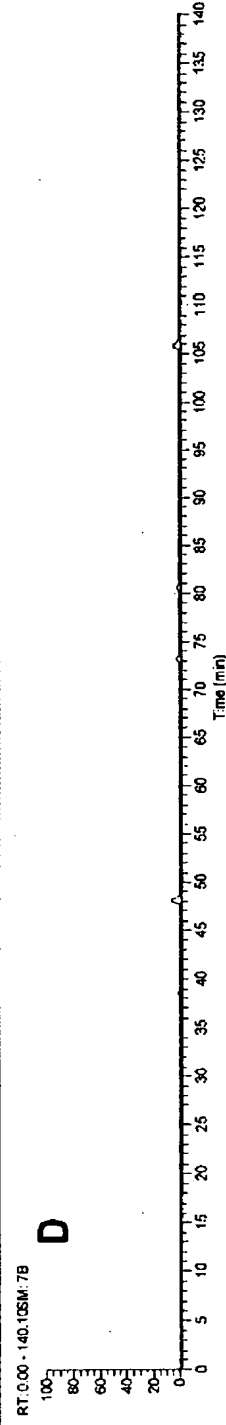
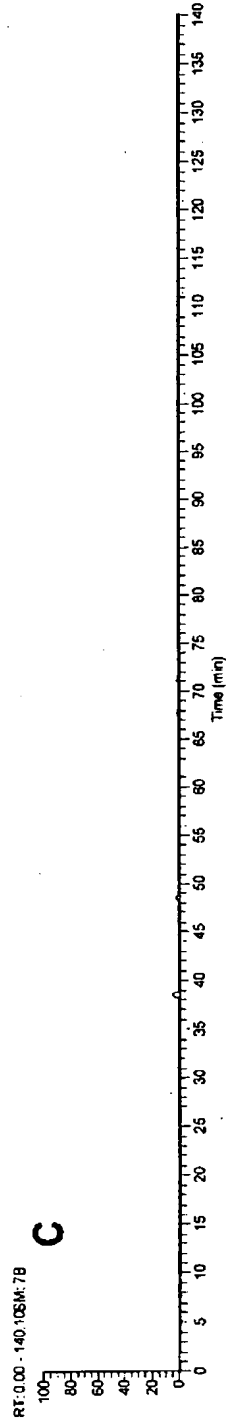
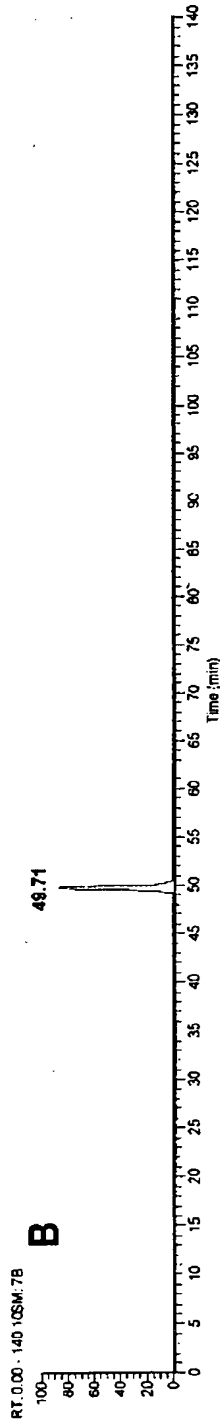
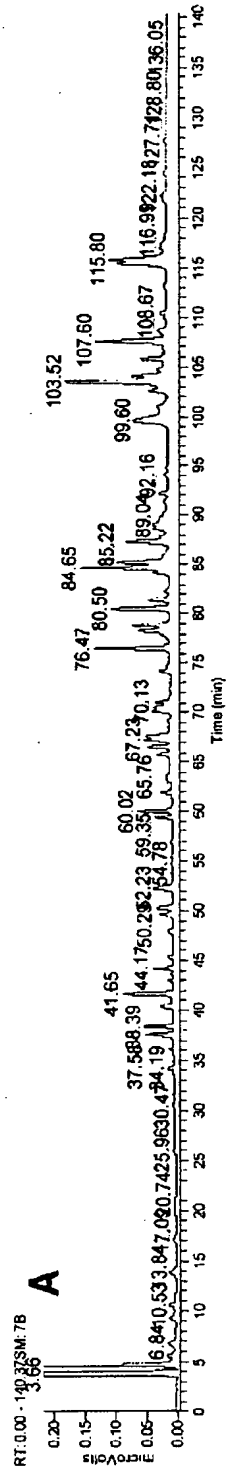


图 11

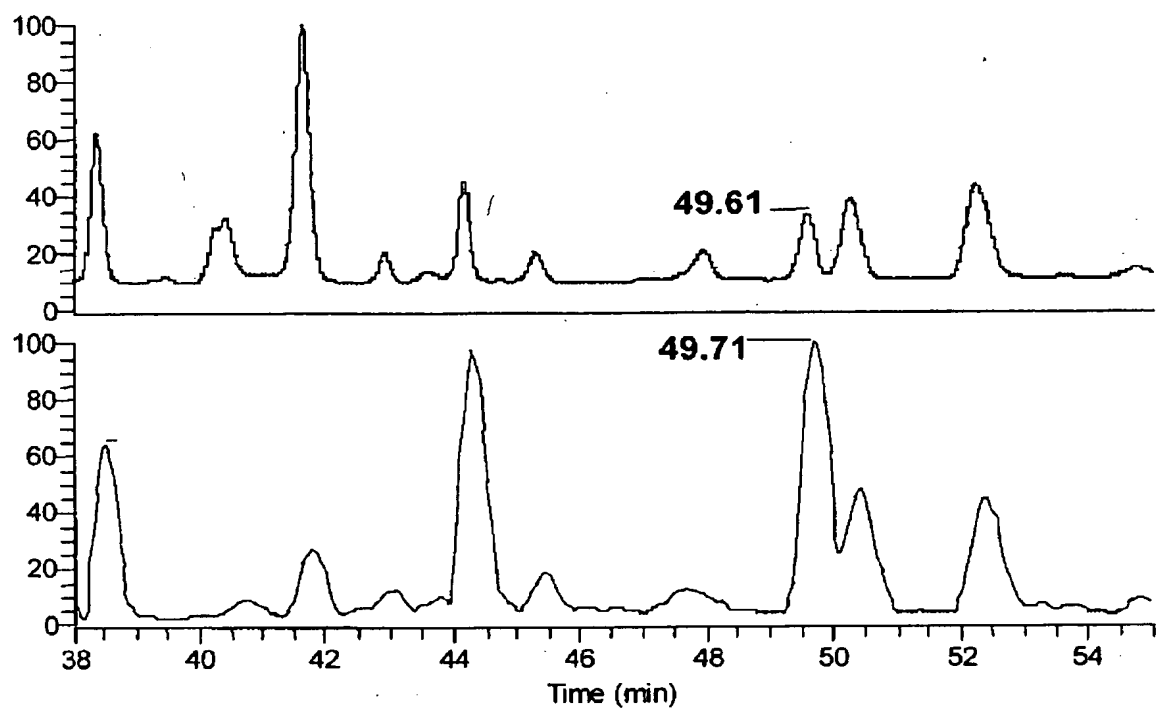




图12


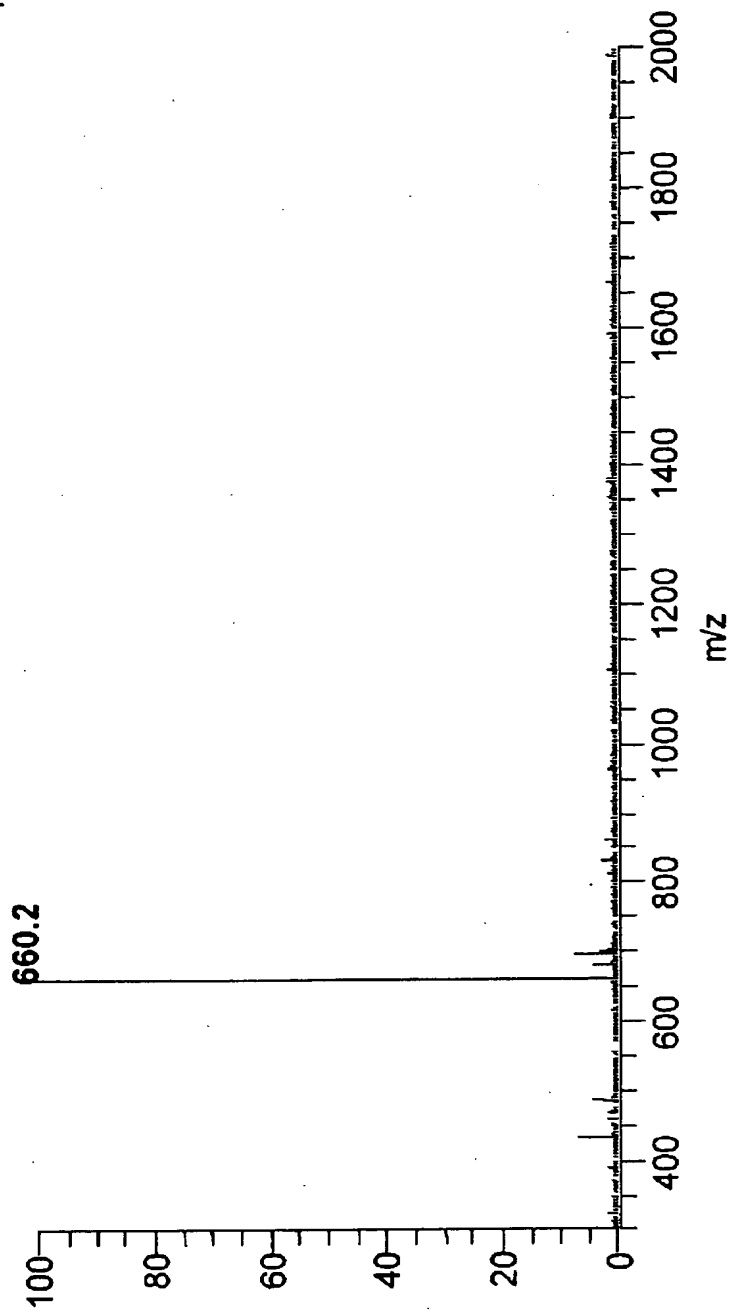


图13

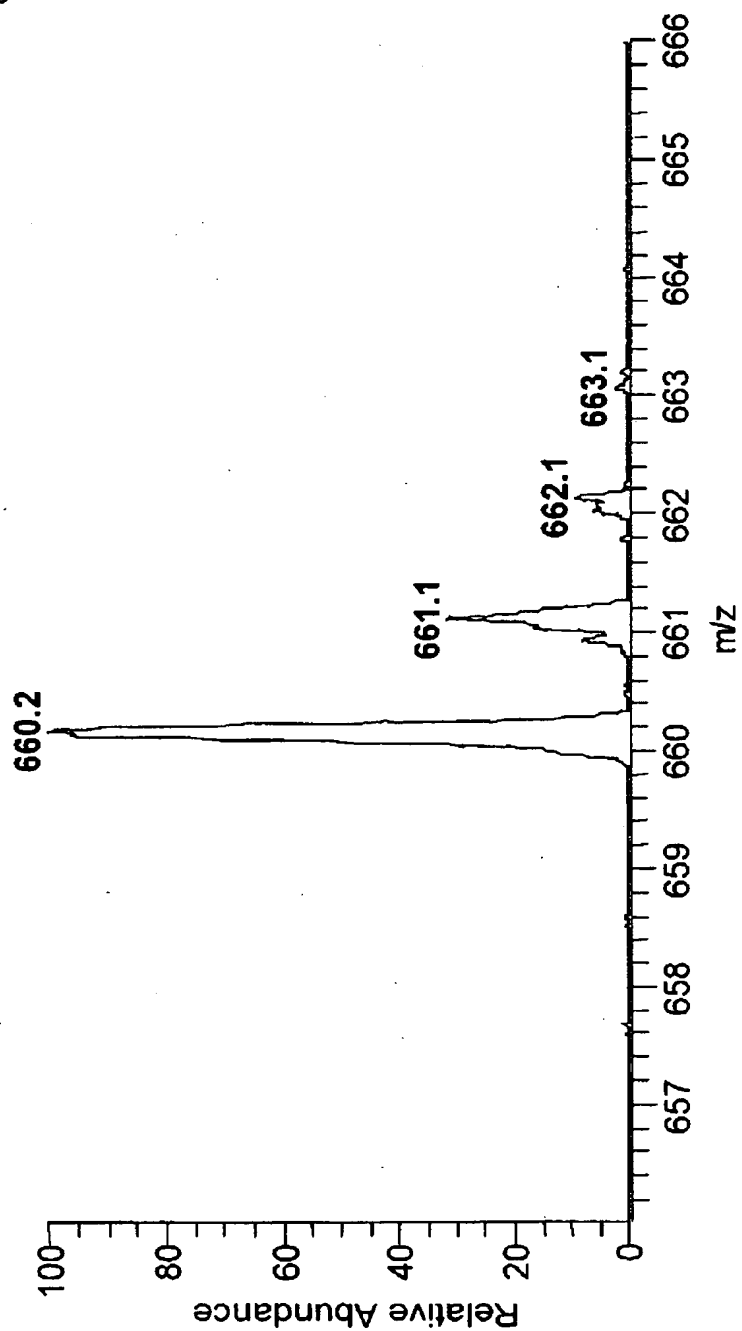

14






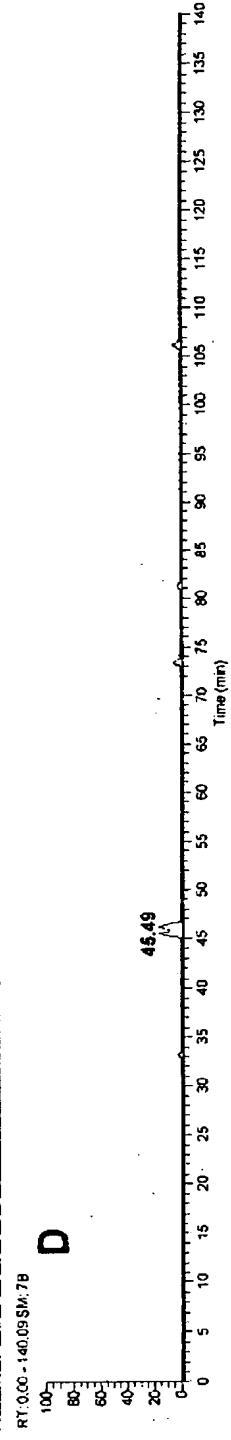


图15

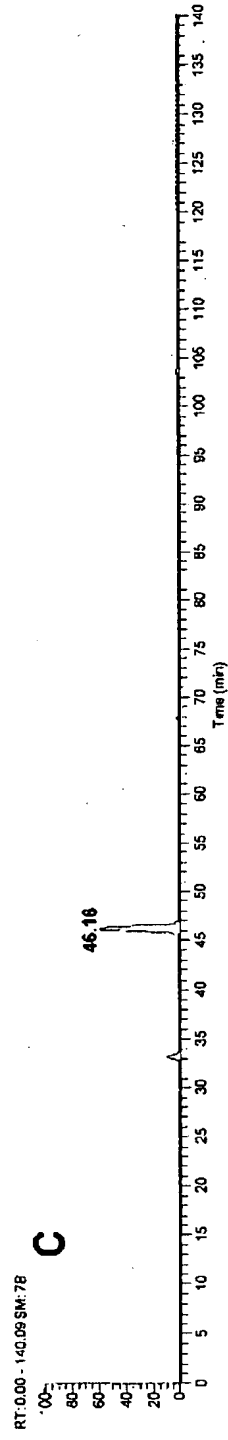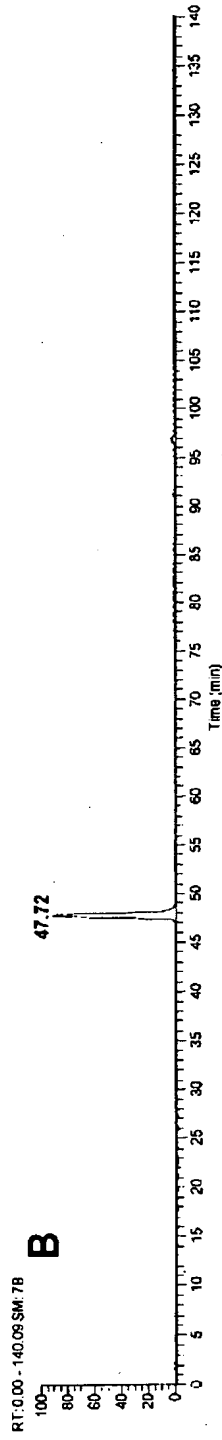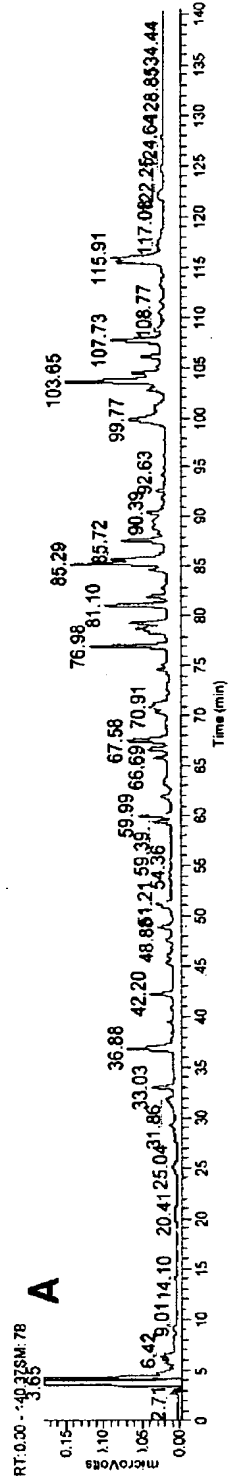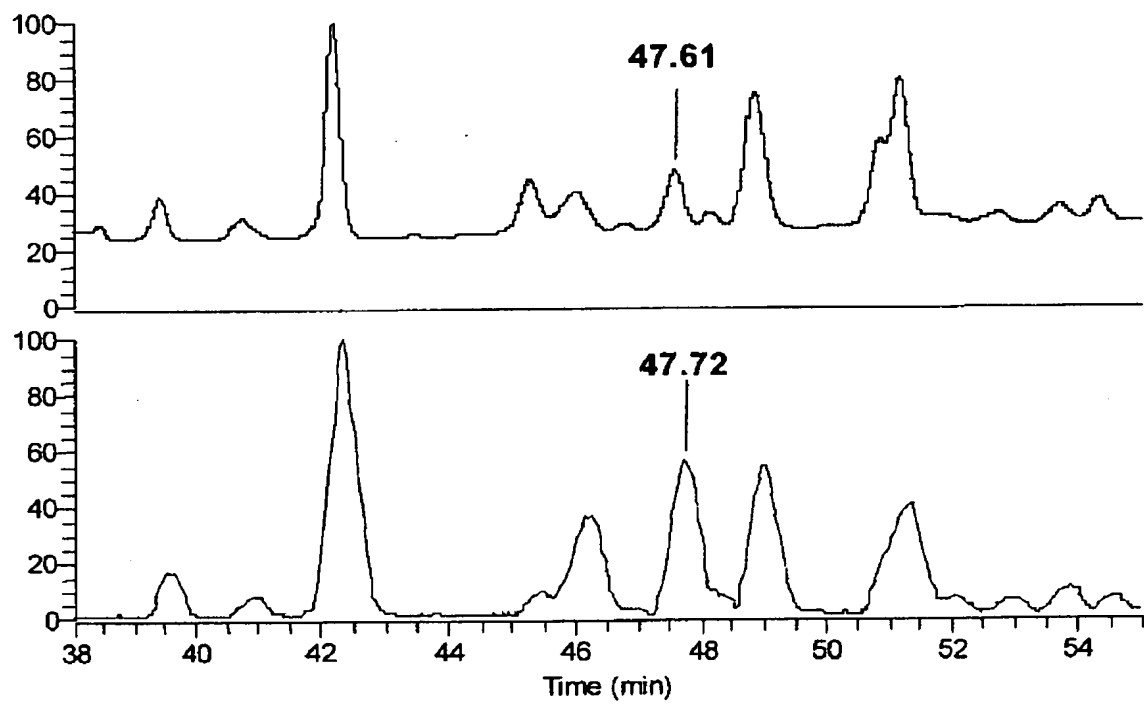

16

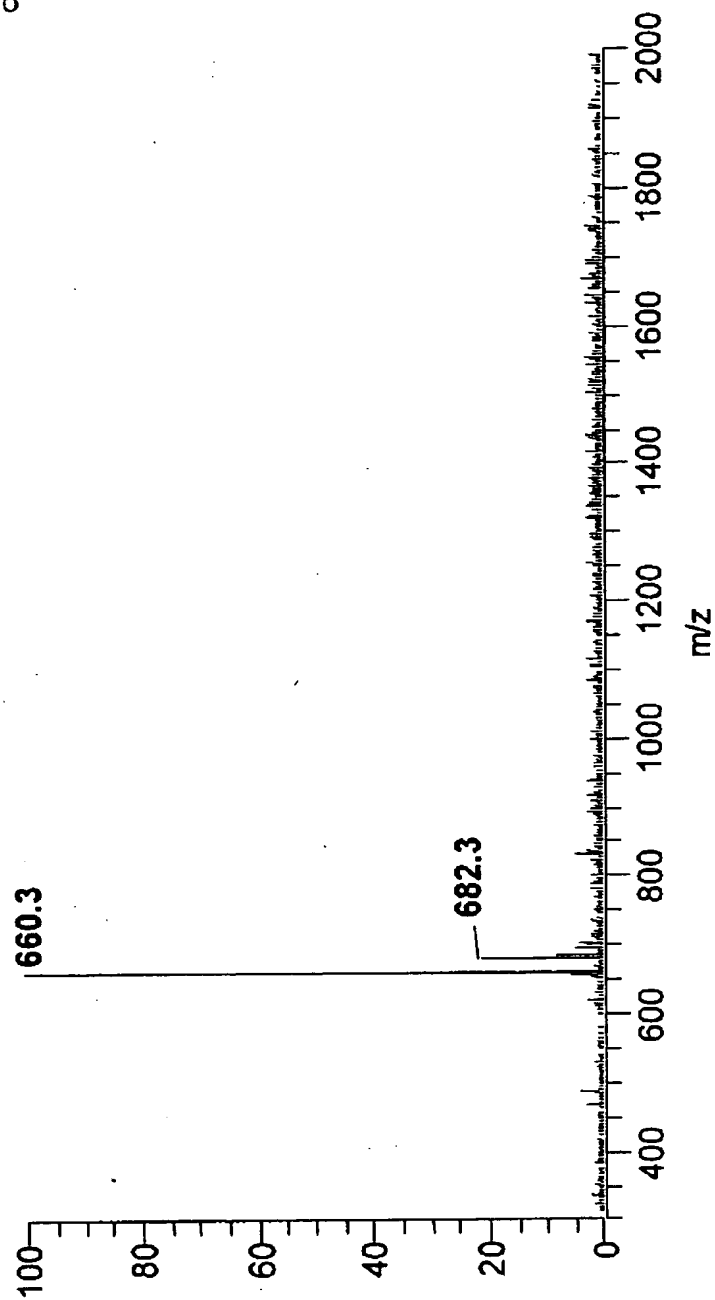

17



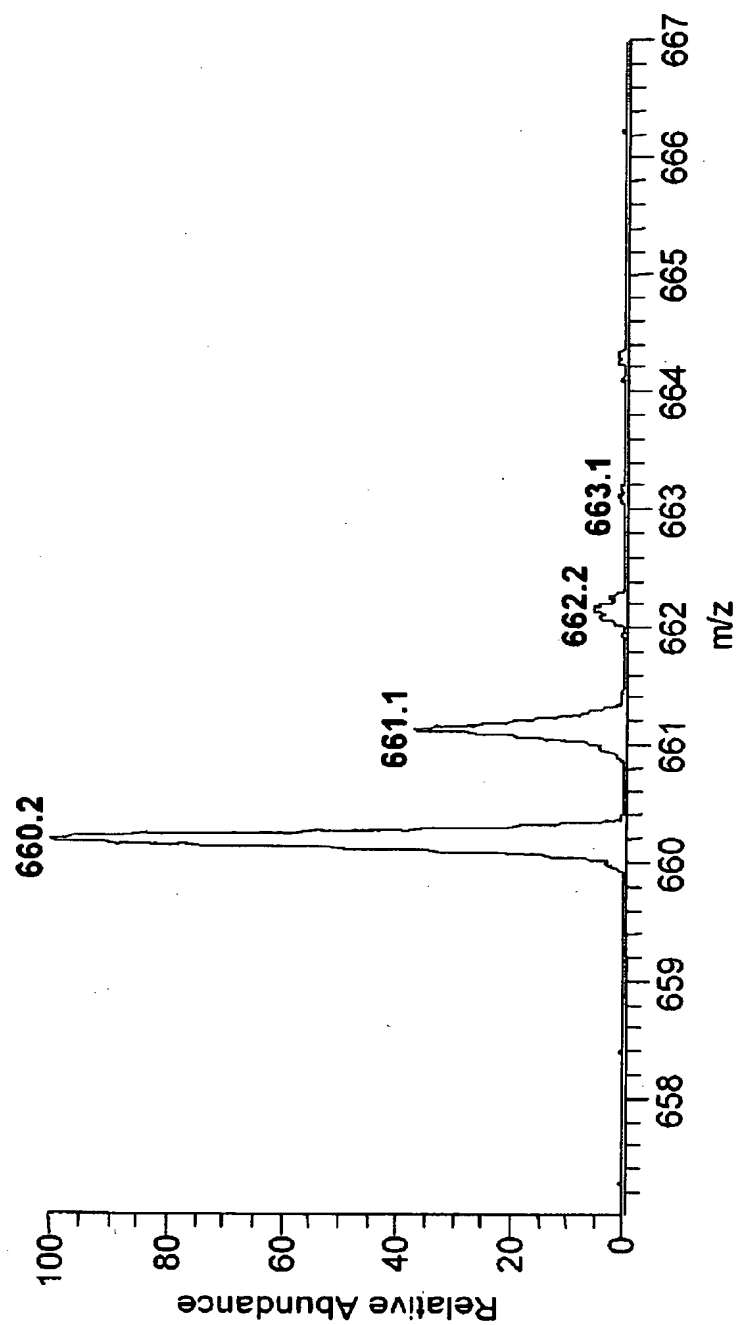


图18




19

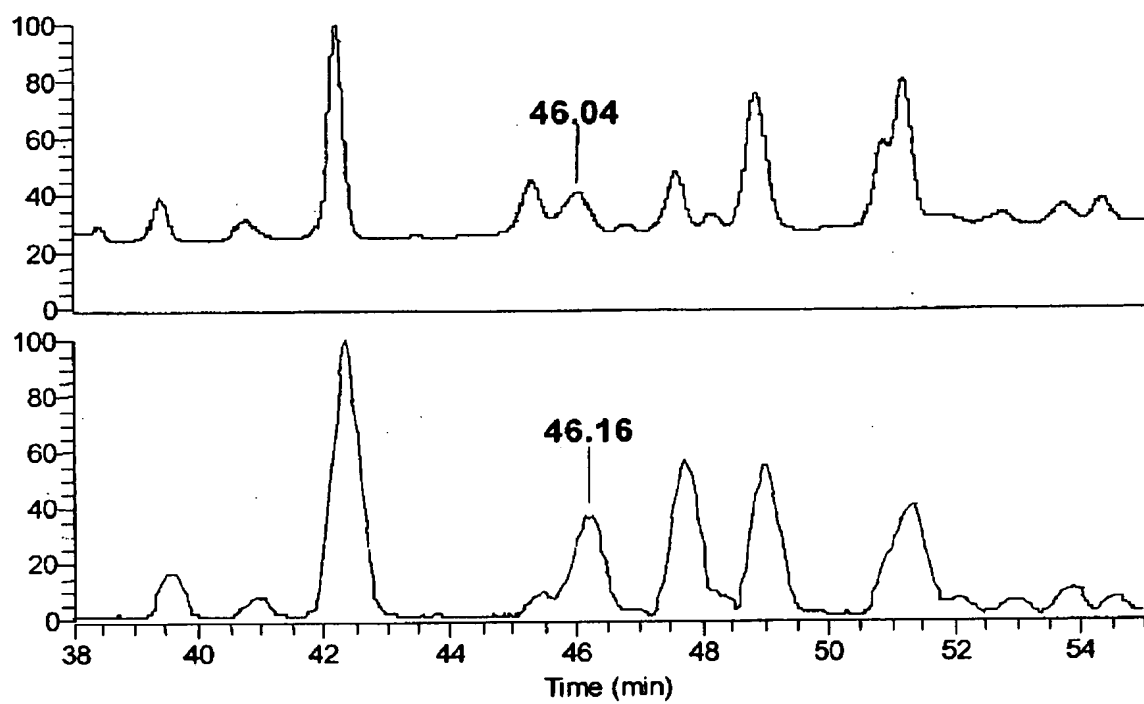

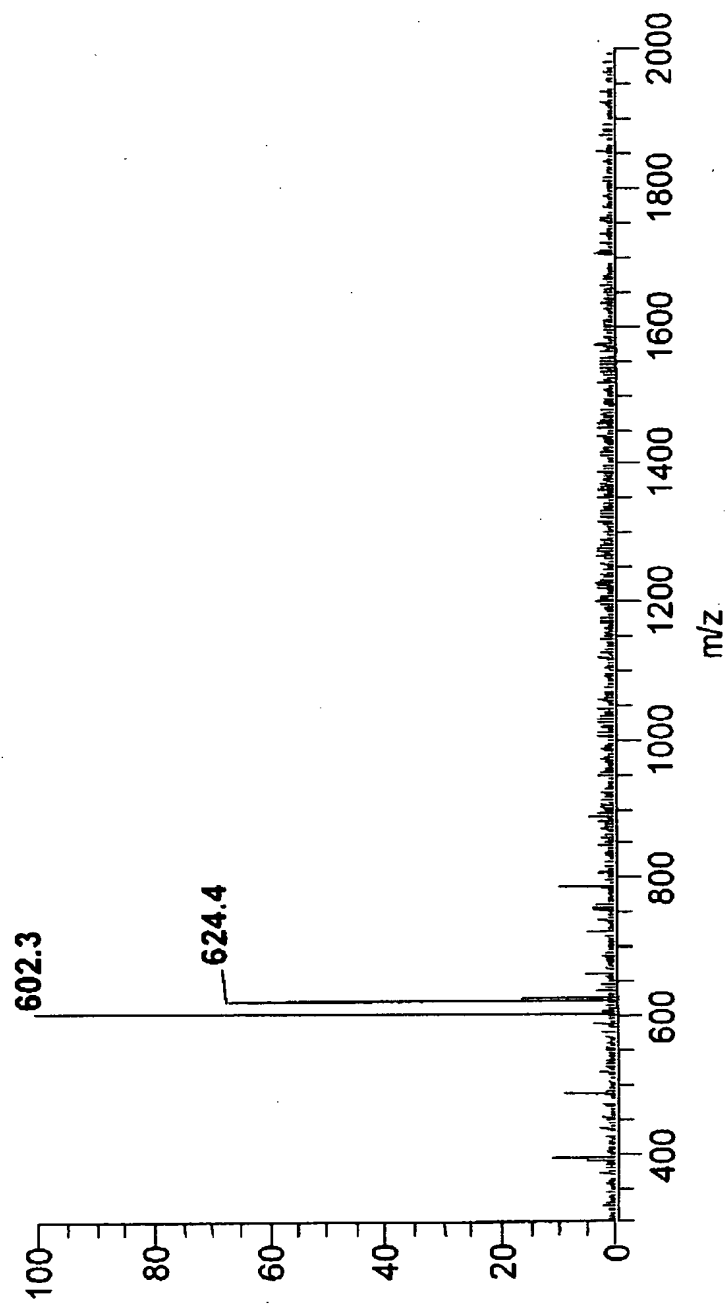

20

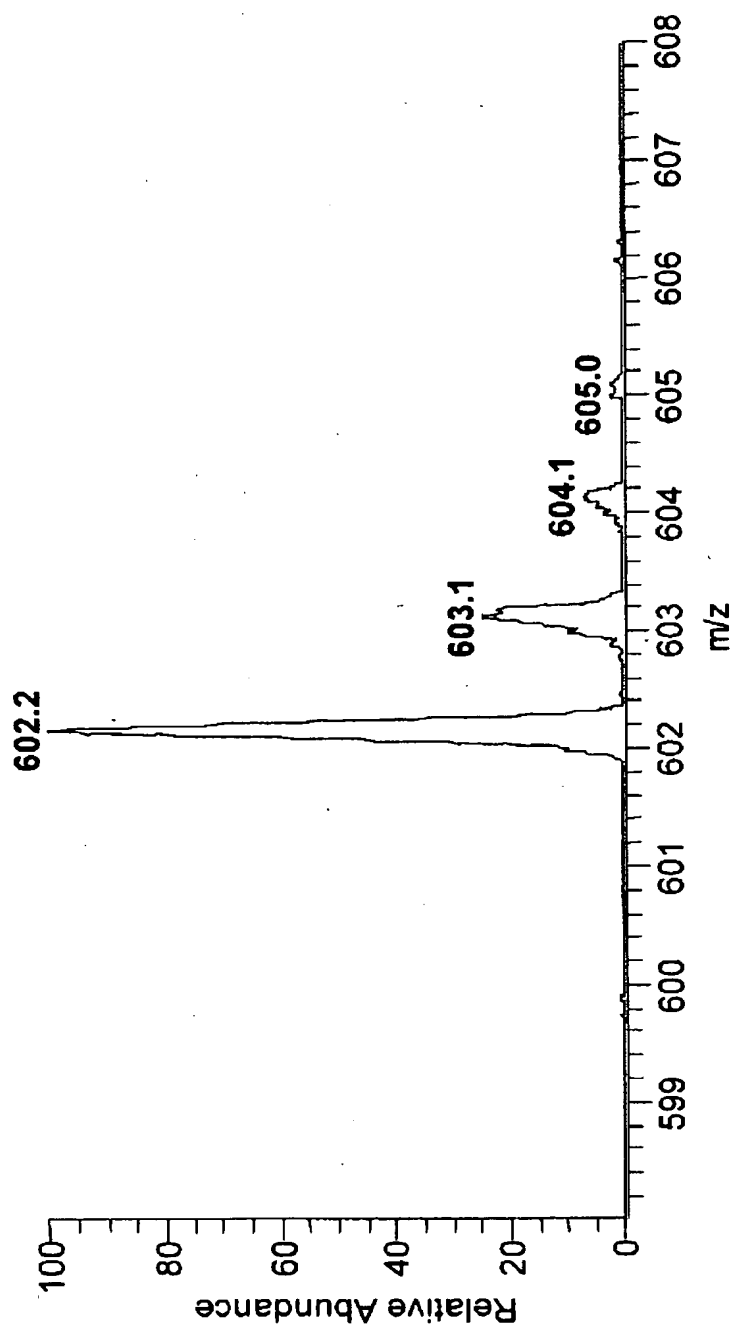

21






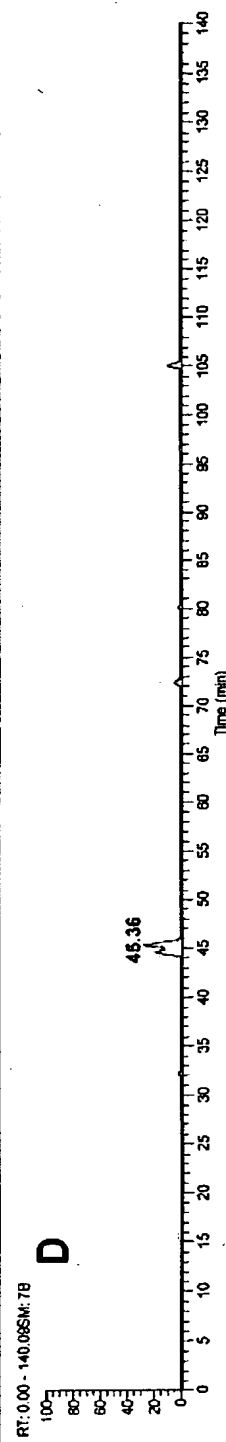



图 22

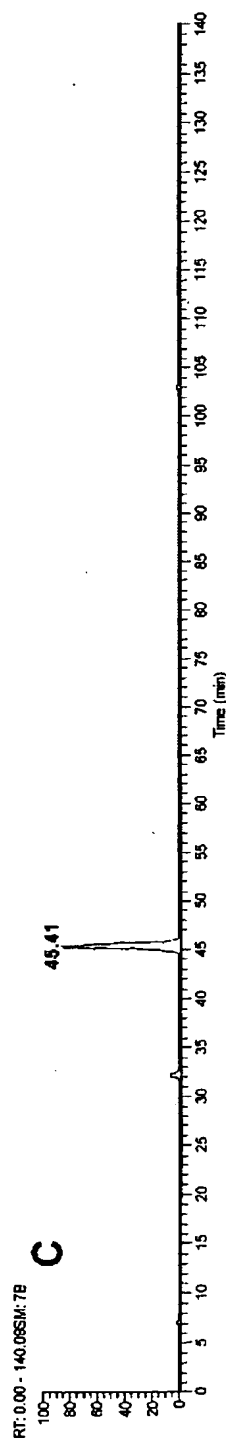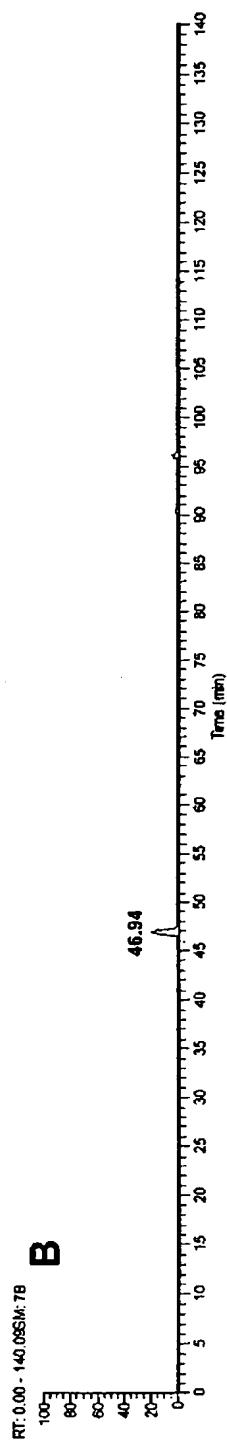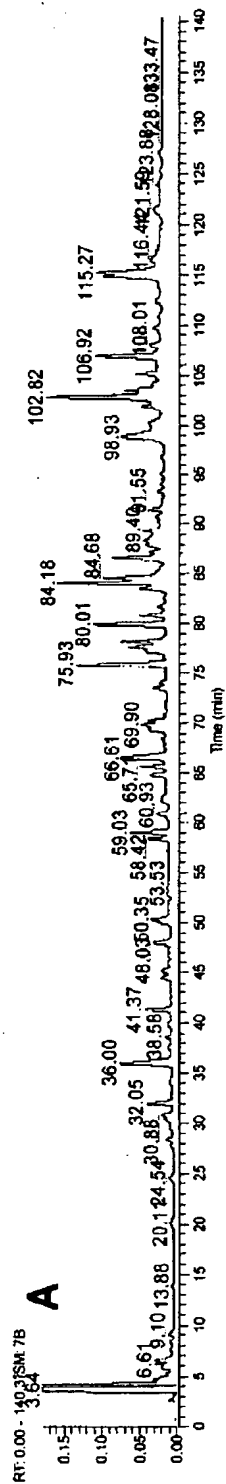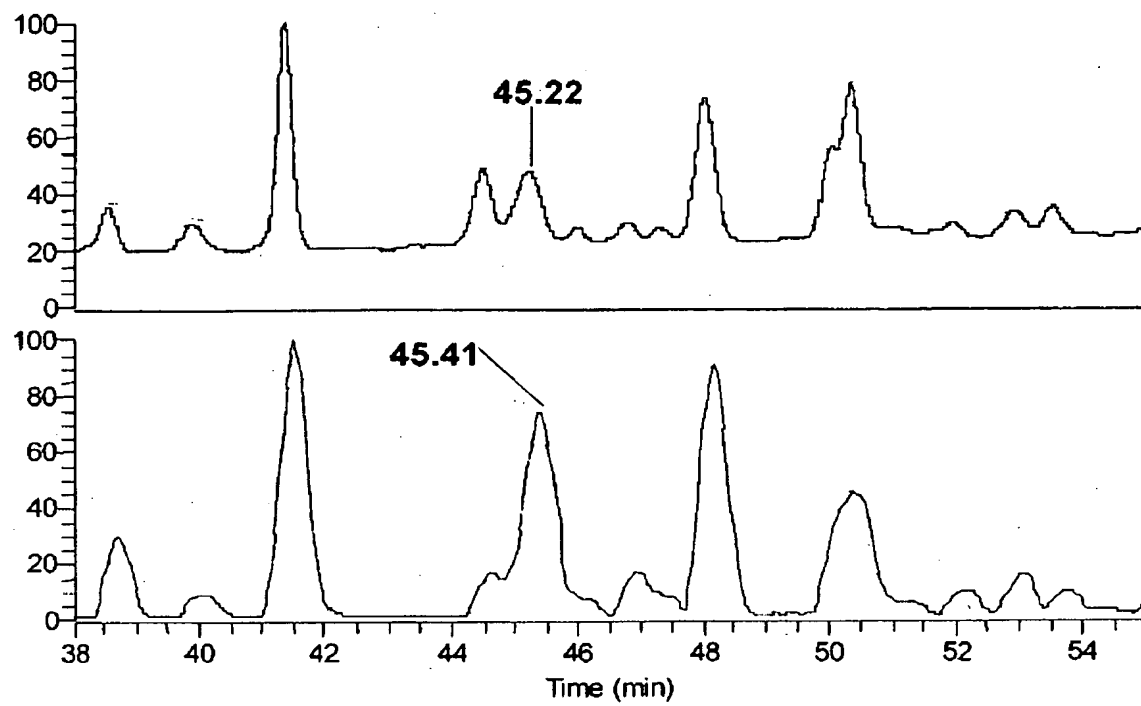

23

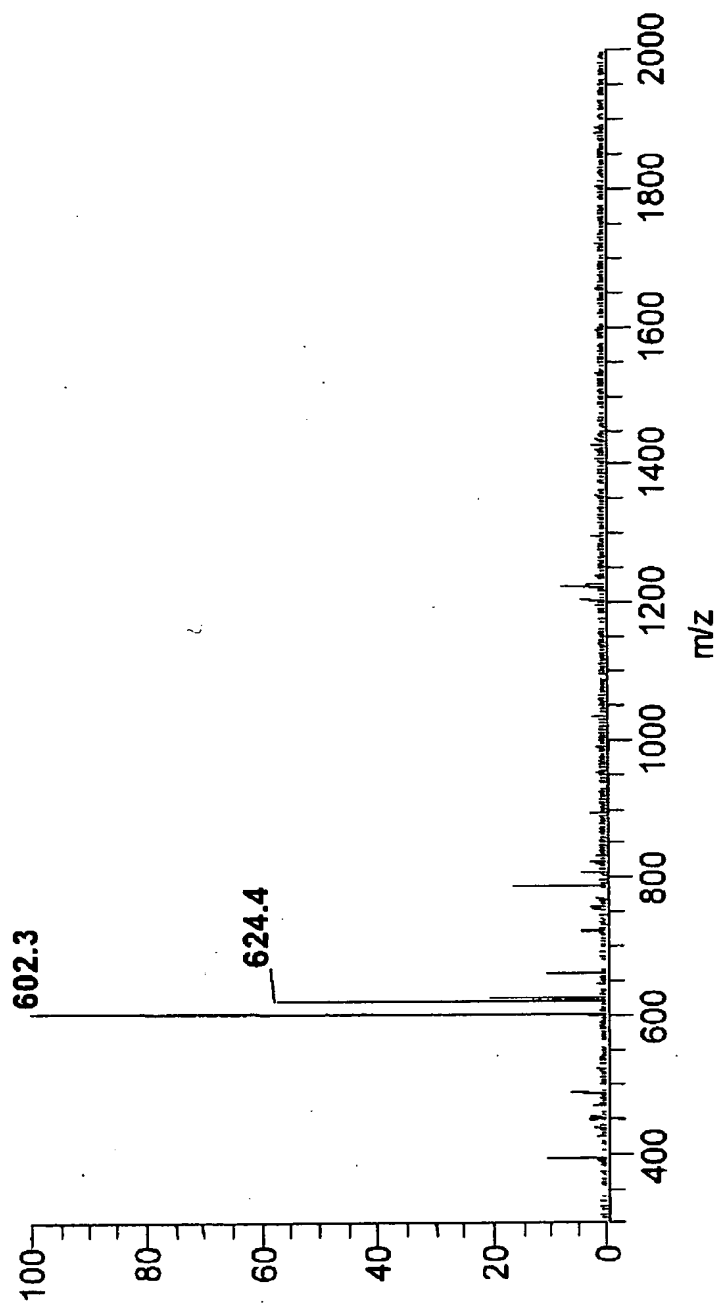

24

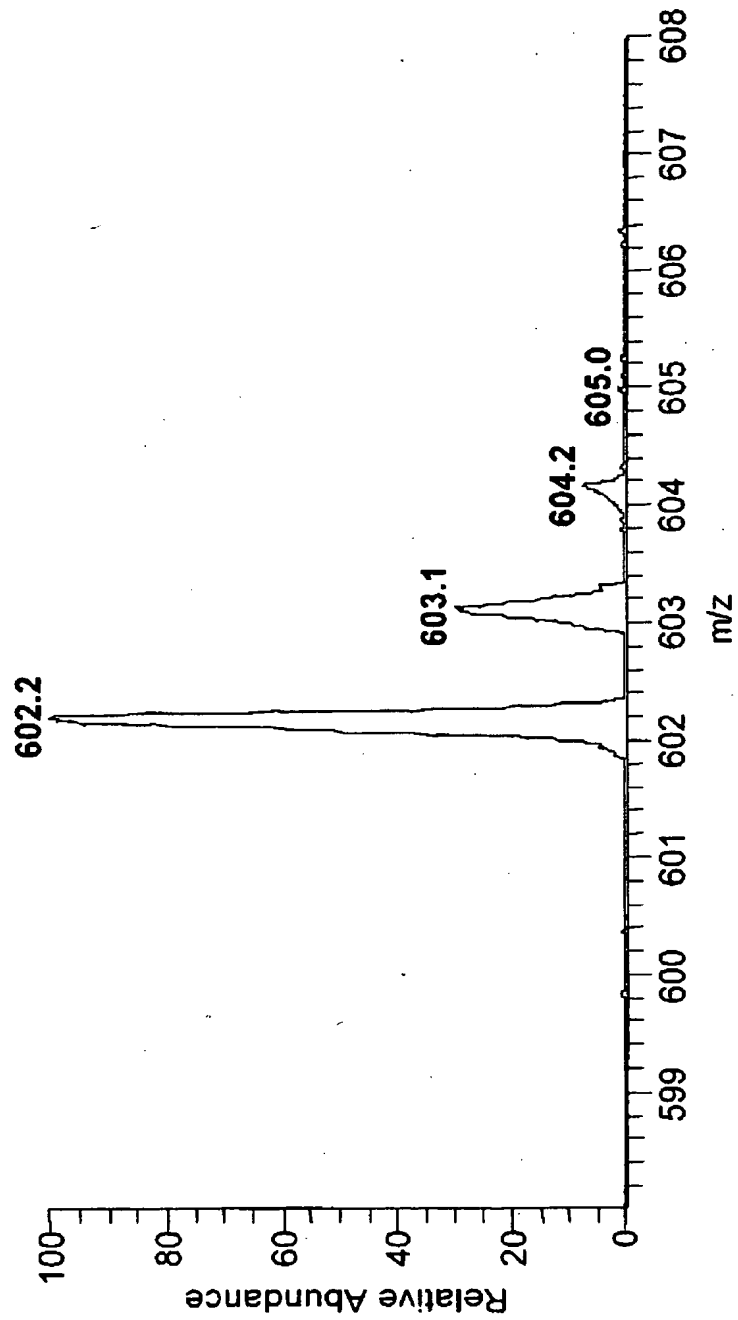

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インターロイキン-6受容体に対するヒト型化PM-1抗体の新規なサブタイプの提供。

【解決手段】 インターロイキン-6受容体(IL-6R)に対するヒト型化PM-1抗体のサブタイプであって、片方の重鎖C末端がPro-NH<sub>2</sub>(447)である抗体サブタイプ(1)、及びインターロイキン-6受容体(IL-6R)に対するヒト型化PM-1抗体のサブタイプであって、両方の重鎖C末端がPro-NH<sub>2</sub>(447)である抗体サブタイプ(2)、並びにこれらを含んで成る医薬組成物。

【選択図】 なし

出願人履歴

0 0 0 0 0 3 3 1 1

19900905

新規登録

5 9 6 0 5 8 8 8 9

東京都北区浮間5丁目5番1号

中外製薬株式会社